


a perfect fit™



SYSTÈME D'IMPLANTS **CONELOG®** CATALOGUE PRODUITS

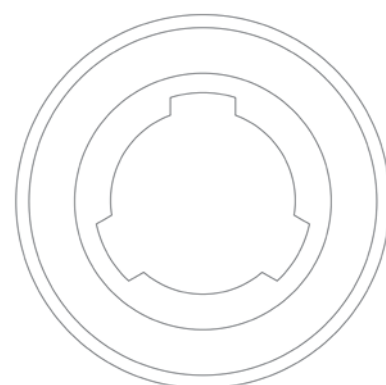

camlog

VALEUR AJOUTÉE

Le partenariat avec CAMLOG se nourrit d'un excellent rapport qualité-prix des systèmes d'implants CAMLOG® et CONELOG® ainsi que d'une gamme de services et de prestations adaptés à vos besoins.

Les compétences spécifiques de CAMLOG vont au-delà d'un produit fiable et facile d'utilisation.

Nous nous tenons entièrement à la disposition de nos clients pour leur faire profiter de toute notre compétence en matière d'implants. Redécouvrez chaque jour la compétence de votre partenaire CAMLOG en matière d'implants et faites-en votre propre valeur ajoutée.

Nous vous conseillerons avec plaisir.





N° d'art. JB001.00.10 Rév.0 09/2011



FRANCE

Henry Schein Implantologie | 4 rue de Charenton | 94140 Alfortville | France
Tél : 01 41 79 74 97 | Fax 01 41 79 74 96 | implantologie@henryschein.com

HEADQUARTERS

CAMLOG Biotechnologies AG | Margarethenstrasse 38 | CH-4053 Basel | Switzerland
Tel +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.camlog.com

Fabricant des produits CAMLOG®/CONELOG® : ALTATEC GmbH, Maybachstraße 5, D-71299 Wimsheim

camlog



camlog

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE SYSTÈME D'IMPLANTS CAMLOG®/CONELOG®	4	SYSTÈME PROTHÉTIQUE	
IMPLANTS CONELOG® SCREW-LINE	5	CONELOG®	33
COMPOSANTS PROTHÉTIQUES CONELOG®	8	APERÇU DU SYSTÈME PROTHÉTIQUE	34
MISES EN GARDE GÉNÉRALES ET CONSEILS DE SÉCURITÉ	10	RÉGLAGE DE LIMITATION DU MOMENT DE TORSION	37
CODE COULEUR	11	PRISE D'EMPREINTE, ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION, FABRICATION DU MODÈLE	38
CHIRURGIE	13	PRISE D'EMPREINTE, PORTE-EMPREINTE OUVERT/FERMÉ	38
PLANIFICATION	14	ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION	39
GRILLES DE PLANIFICATION RADIOLOGIQUE ET CALQUES D'IMPLANT AUTOCOLLANTS	14	FABRICATION DU MODÈLE	39
PLANIFICATION PAR TOMOGRAPHIE INFORMATISÉE	15	RESTAURATIONS SUR COURONNES ET BRIDGES	39
GAMMES D'IMPLANTS	16	PILIER PROVISoire CONELOG®	39
IMPLANTS CONELOG® SCREW-LINE	17	PILIERs CONELOG® ESTHOMIC®	40
SET CHIRURGICAL CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE	18	PILIER UNIVERSEL CONELOG®	42
INSTRUMENTS CHIRURGICAUX SCREW-LINE	19	PILIER OR-PLASTIQUE CONELOG®	42
SET D'OSTÉOTOMIE SCREW-LINE	22	ACCESSOIRES POUR PILIERs CAMLOG®	43
COIFFE DE CICATRISATION CONELOG®	26	RESTAURATIONS SUR COURONNES, SUR BRIDGES ET HYBRIDES	44
SET ALTAPIN	28	PILIERs CONELOG® VARIO SR	44
SET D'ÉLEVATION SINUSIENNE	29	ACCESSOIRES POUR VARIO SR	48
INSTRUMENTS	30	RESTAURATIONS HYBRIDES	50
INSTRUMENTS CHIRURGICAUX	30	PILIER UNIVERSEL CONELOG®	50
INSTRUMENTS CHIRURGICO-PROTHÉTIQUES	32	PILIER TÉLESCOPE CONELOG®	50
		ACCESSOIRES POUR PILIERs CAMLOG®	51
		INSTRUMENTS DENTAIRES	52
		PILIERs DE SÉLECTION CONELOG® ESTHOMIC®	53
		ARTICLES COMPLÉMENTAIRES	55
		IMPLANTS FACTICES	56
		MODÈLES DE DÉMONSTRATION	56
		MACRO MODÈLE	56
		LITTÉRATURE CAMLOG	57
		INFORMATIONS	59
		INDEX	63
		ALPHABÉTIQUE	64
		PAR NUMÉRO D'ARTICLE	69
		BON DE COMMANDE	73



N° d'art. JB001.00.10 Rév.0 09/2011



FRANCE

Henry Schein Implantologie | 4 rue de Charenton | 94140 Alfortville | France
Tél : 01 41 79 74 97 | Fax 01 41 79 74 96 | implantologie@henryschein.com

HEADQUARTERS

CAMLOG Biotechnologies AG | Margarethenstrasse 38 | CH-4053 Basel | Switzerland
Tel +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.camlog.com

Fabricant des produits CAMLOG®/CONELOG® : ALTATEC GmbH, Maybachstraße 5, D-71299 Wimsheim

camlog

LE SYSTÈME D'IMPLANTS CONELOG®

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

IMPLANTS CONELOG® SCREW-LINE

Les implants CONELOG® SCREW-LINE sont des implants endo-osseux, disponibles en plusieurs longueurs et diamètres. Ils sont placés chirurgicalement dans l'os du maxillaire et/ou de la mandibule et servent à ancrer des restaurations buccales fonctionnelles et esthétiques chez des patients partiellement ou totalement édentés. La restauration prothétique est effectuée à l'aide de couronnes unitaires, de bridges ou de prothèses totales reliés par des éléments CONELOG® correspondants aux implants CONELOG® SCREW-LINE. On peut utiliser différentes tailles d'implants dans les deux mâchoires. L'implant CONELOG® SCREW-LINE a la configuration d'un implant à vis conique et autotaraudant, disponible avec la surface Promote®.


Implantation

L'implant CONELOG® SCREW-LINE est approprié pour l'implantation en un temps (mise en charge immédiate) ou deux temps chirurgicaux. La cicatrisation peut s'effectuer avec une coiffe de cicatrisation ou de façon transgingivale. La forme conique du corps de l'implant de 3° à 9° (selon la longueur et le diamètre) permet une insertion facile grâce à l'autocentrage. Le filetage autotaraudant assure une adhérence continue à l'os et une importante stabilité primaire.

REMARQUE IMPORTANTE

Les implants CONELOG® de 7 mm de longueur

doivent seulement être utilisés quand la place disponible n'est pas suffisante pour des implants plus longs. Une restauration immédiate de dents unitaires n'est pas recommandée avec ces implants. En cas de rapport défavorable entre la longueur de la couronne et la longueur de l'implant, les facteurs de risques biomécaniques doivent être pris en compte et les mesures nécessaires doivent être instaurées par un expert.

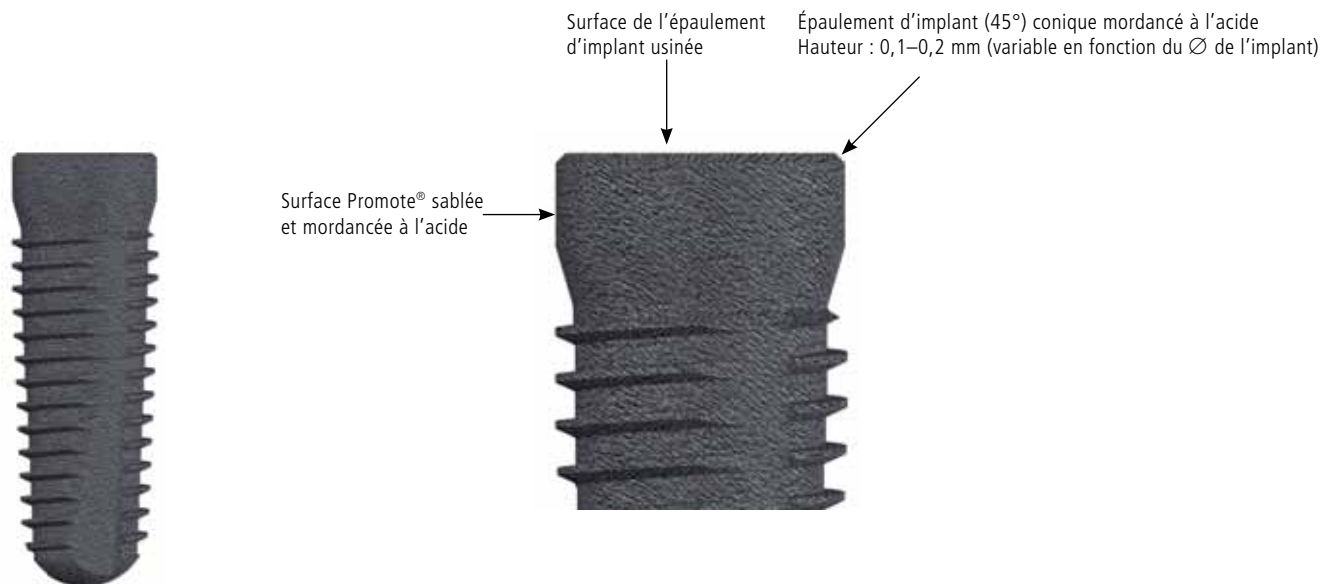

Implant CONELOG® SCREW-LINE
Promote® plus

LE SYSTÈME D'IMPLANTS CONELOG®

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

REMARQUE IMPORTANTE

Les implants CONELOG® de 3,3 mm de diamètre

constituent une alternative de traitement pour les largeurs de crête osseuse limitées de 5–6 mm. Étant donné leur moindre résistance mécanique en comparaison avec les implants de diamètre plus important, il faut les utiliser uniquement dans les cas suivants :

- À l'unité, exclusivement pour le remplacement des incisives de la mandibule et/ou des incisives latérales du maxillaire.
- Les implants de Ø 3,3 mm conviennent pour la restauration de sites partiellement édentés s'ils sont combinés avec des implants de diamètre supérieur dans le cadre de superstructures solidarisées. Le préalable est cependant que la solidité limitée des implants de Ø 3,3 mm soit prise en compte.

Le temps de cicatrisation des implants de Ø 3,3 mm est d'environ 12 semaines.

Les constructions à coiffes télescopiques ne sont pas possibles sur des implants de Ø 3,3 mm.


REMARQUE IMPORTANTE

Pour la préparation du site de l'implant CONELOG® SCREW-LINE, on procède comme pour l'implant CAMLOG® SCREW-LINE. La préparation du site de l'implant s'effectue avec des forets et instruments SCREW-LINE.

Surface Promote®

L'implant CONELOG® SCREW-LINE existe avec la surface Promote®. La surface Promote® sablée et mordancée à l'acide couvre tout le corps de l'implant jusqu'à l'épaulement conique de l'implant mordancé à l'acide (45°).


La surface Promote® a fait ses preuves pour l'ancrage des implants dentaires dans l'os, et montre de bons résultats scientifiques en histologie osseuse et lors des tests de dévissage. Ces résultats permettent de conclure que la surface Promote® permet une ostéointégration rapide des implants CONELOG®.

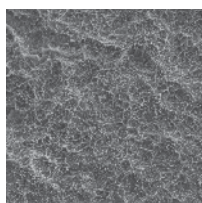

Surface Promote®

CONFIGURATION INTERNE DE L'IMPLANT CONELOG® SCREW-LINE

La configuration interne des implants CONELOG® SCREW-LINE est pourvue d'un cône (7,5°) et de trois rainures pour le positionnement de piliers CONELOG®. Les piliers CONELOG® sont munis dans leur zone apicale d'un cône, ainsi que de trois comes et s'imbriquent dans la connexion par cône et les trois rainures de l'implant. L'épaulement n'est pas recouvert par le pilier CONELOG®. Les piliers CONELOG® sont fixés avec une vis de pilier CONELOG® dans l'implant CONELOG® SCREW-LINE avec un couple de serrage défini.

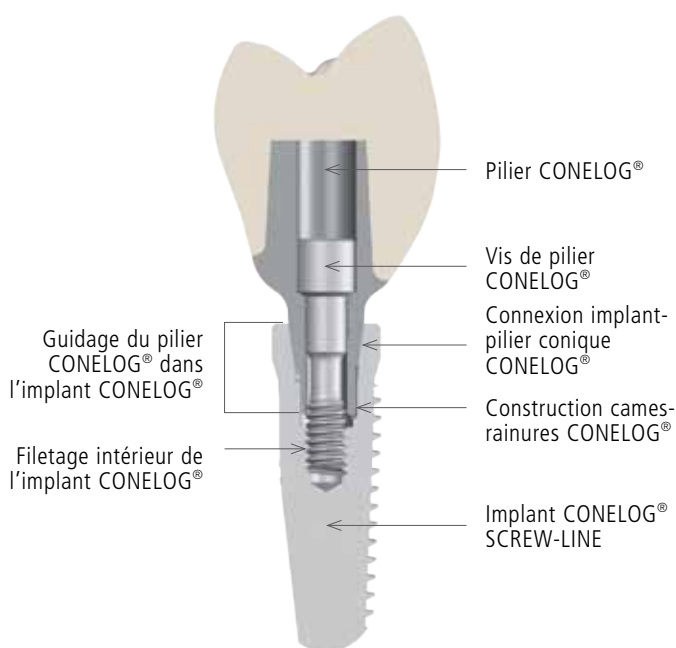

LE SYSTÈME D'IMPLANTS CONELOG®


INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Pour un positionnement optimal du pilier dans l'implant, ce filetage doit être orienté dans l'os de telle sorte que l'une des trois rainures soit placée du côté vestibulaire. Les instruments de vissage sont pourvus de repères externes qui correspondent à la configuration interne de l'implant CONELOG® avec les trois rainures.




PRÉCISION DE FABRICATION

Les formes intérieures et extérieures des implants et des piliers CONELOG® sont en grande partie usinées par tournage. Les tolérances peuvent ainsi être limitées au minimum. Il en résulte une exceptionnelle précision d'ajustage des pièces, sans endommagement de la structure des matériaux. La connexion implant-pilier CONELOG® assure ainsi une connexion très précise, stable et anti-rotationnelle des composants prothétiques CONELOG®.

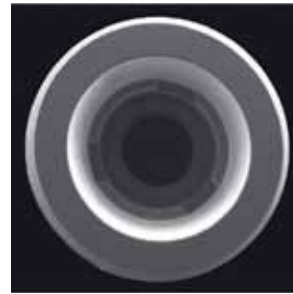

Implant CONELOG® SCREW-LINE

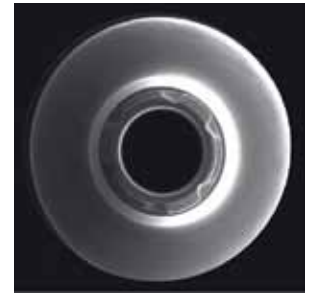

Pilier CONELOG®



Construction comes-rainures de la connexion implant-pilier CONELOG®

COMPOSANTS CONELOG®

Il existe des composants CONELOG® spécialement adaptés aux implants CONELOG® SCREW-LINE, notamment les vis de fermeture CONELOG®, les coiffes de cicatrisation CONELOG®, les piliers de prise d'empreinte CONELOG® et les composants prothétiques CONELOG®.



Vis de fermeture CONELOG®

Coiffe de cicatrisation CONELOG®
bottleneck, évasée, cylindrique



Piliers de prise d'empreinte CONELOG®,
porte-empreinte ouvert et fermé

LE SYSTÈME D'IMPLANTS CONELOG®

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES CONELOG®

Les implants CONELOG® SCREW-LINE peuvent être restaurés avec une palette de composants prothétiques polyvalents, adaptés aux conditions anatomiques. Il est possible d'obtenir des solutions esthétiques de manière optimale. Les piliers CONELOG® portent un code couleur correspondant au diamètre de l'implant.

Pilier provisoire CONELOG®

Le pilier provisoire CONELOG® (alliage en titane) peut être utilisé pour l'implantation immédiate ou après la réouverture du site implantaire pour la restauration provisoire.



Piliers CONELOG® Esthomic®

Les piliers CONELOG® Esthomic® sont pourvus d'un épaulement anatomique et sont disponibles en différentes hauteurs gingivales.


- Pilier CONELOG® Esthomic®, droit
- Pilier CONELOG® Esthomic®, angulé à 15°/20°, type A et B
- Pilier CONELOG® Esthomic®, Inset



Piliers CONELOG® Esthomic® angulés de type A et B

Dans la gamme de piliers CONELOG® Esthomic®, des piliers angulés de type A et B sont disponibles. Pour le type A, une came est dirigée à l'opposé du sens de l'angulation. Le type B présente, contrairement au type A, des cames placées à 60°. Ainsi, grâce à ces deux types de pilier, six positions de rotation différentes sont possibles, afin d'obtenir une orientation optimale de l'axe prothétique.

Orientation des cames du pilier CONELOG®

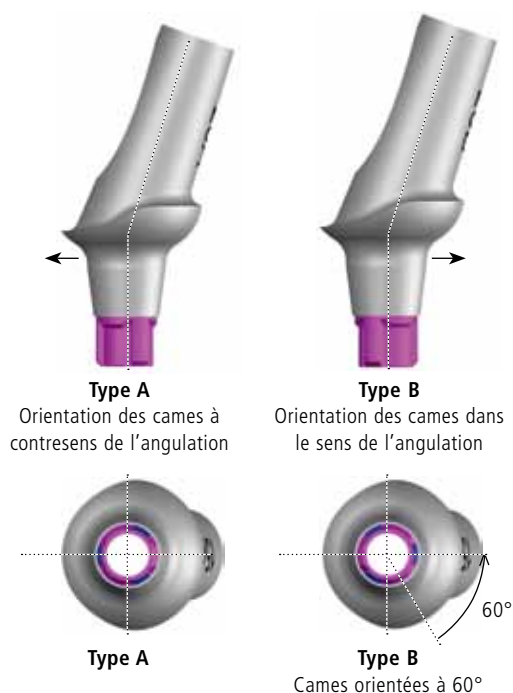

Pilier or-plastique CONELOG®

Avec le pilier or-plastique CONELOG®, il est possible de fabriquer, à l'aide de la technique de surcoulée, des couronnes unitaires, des piliers d'implants personnalisés (mésostructures) pour des bridges scellés, et des piliers primaires permettant de compenser les divergences d'axes d'implant dans les restaurations à coiffes télescopiques.



LE SYSTÈME D'IMPLANTS CONELOG®

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME


Piliers CONELOG® Vario SR

Les piliers CONELOG® Vario SR existent en version droite et en version angulée à 20° et 30°. Les grandes divergences d'axes d'implant peuvent ainsi être compensées. Les composants prothétiques préfabriqués Vario SR permettent de fabriquer des restaurations occlusales vissées sur couronnes, sur bridge et sur barre. Les coiffes calcinables Vario SR permettent la fabrication de constructions sur couronnes et bridges coulées. Les coiffes en titane sont dotées d'une surface extérieure de rétention et sont conçues pour la fabrication de constructions en plastique sur bridge, provisoires ou définitives. Pour la fabrication de constructions sur barres soudées au laser, il existe des coiffes en titane.



Piliers télescope et universel CONELOG®

Les piliers télescope et universel CONELOG® peuvent être utilisés avec des restaurations de type couronne ou bridge personnalisées à sceller et des restaurations à coiffes télescopiques. Les piliers sont fabriqués en alliage de titane et peuvent être personnalisés par meulage.

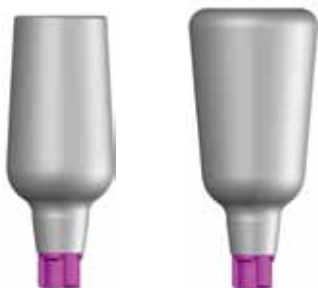

INSTRUMENT DE RETRAIT CONELOG® POUR PILIERS CONELOG®

Les piliers CONELOG® doivent être retirés de l'implant/analogue de laboratoire CONELOG® avec l'instrument de retrait CONELOG® pour piliers CONELOG®. S'il est impossible de libérer le pilier, la clé dynamométrique (bloquée) peut être placée sur l'instrument de retrait et serrée dans le sens des aiguilles d'une montre afin de libérer le pilier.



REMARQUE IMPORTANTE

En raison de leur configuration interne conique, les implants CONELOG® SCREW-LINE sont uniquement compatibles avec les composants CONELOG®.

LE SYSTÈME D'IMPLANTS CONELOG®

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

MISES EN GARDE GÉNÉRALES ET CONSEILS DE SÉCURITÉ

Les descriptions fournies dans ce catalogue produits sont insuffisantes pour une utilisation immédiate du système d'implants CONELOG®. Nous recommandons une initiation au maniement du système d'implants CONELOG® faite par un opérateur expérimenté.

Une procédure incorrecte lors de l'utilisation des produits CAMLOG®/CONELOG® peut être à l'origine d'un échec, d'une perte d'implant, d'une perte osseuse ou de résultats esthétiques. Les produits ne doivent être utilisés que par des dentistes, médecins et chirurgiens formés sur le système d'implants. L'utilisation des produits requiert des connaissances et aptitudes spéciales en implantologie dentaire. CAMLOG propose régulièrement des cours et des conseils relatifs à la technique d'utilisation de ses produits. Votre représentant local CAMLOG se tient volontiers à votre disposition.

Nos produits ne sont vendus qu'à des médecins/dentistes et à des laboratoires dentaires, ou aux personnes mandatées par ces derniers. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Les conseils relatifs à la technique d'utilisation de nos produits sont communiqués verbalement, par écrit, sur supports électroniques et/ou au cours de démonstrations. Ils correspondent à l'état de la science et de la technique tel qu'il est au moment de la mise sur le marché du produit. Ils ne dégagent pas l'utilisateur de son obligation de vérifier que le produit est bien adapté aux fins, indications et procédés envisagés. Le traitement et l'utilisation du produit échappent à notre contrôle et engagent la responsabilité de l'utilisateur. Toute responsabilité pour les dommages en résultant est exclue.

Utilisez les produits CAMLOG®/CONELOG® uniquement en connexion avec des implants et des instruments CAMLOG®/CONELOG®. Nous ne prenons en charge aucune prestation de garantie ou de remplacement en cas d'utilisation de composants n'appartenant pas au système. Le système d'implants CAMLOG®/CONELOG® fait partie d'un concept global et ne doit être utilisé qu'avec les pièces et les instruments originaux correspondants, conformément aux recommandations et instructions du fabricant. Tous les éléments du système d'implants CAMLOG®/CONELOG® sont parfaitement adaptés les uns aux autres. L'utilisation de composants n'appartenant pas au système peut affecter le fonctionnement du système. ALTATEC GmbH/CAMLOG® ne prend en charge aucune prestation de garantie ou de remplacement en cas d'utilisation de composants n'appartenant pas au système.

Les instruments et composants du système sont conçus pour des gammes d'implants et gammes prothétiques, ainsi que des diamètres d'implants spécifiques. L'utilisation de tels instruments ou composants pour une autre gamme d'implants ou prothétique, ou pour un autre diamètre d'implants peut

entraîner la défaillance mécanique des composants du système, des dommages tissulaires ou des résultats esthétiques insatisfaisants. C'est la raison pour laquelle il existe parfois pour certaines gammes d'implants et gammes prothétiques des composants propres avec des instruments adaptés. Respectez le code couleur lors de la sélection des piliers et des instruments pour le diamètre d'implant requis.

Les produits réutilisables CAMLOG®/CONELOG® peuvent, sauf instructions contraires précisées dans la notice d'utilisation, être utilisés tant que les contrôles prescrits dans les notices d'utilisation ou le mode d'emploi continuent à obtenir des résultats positifs. Les produits CAMLOG®/CONELOG® à usage unique ne doivent pas être réutilisés, car leur sécurité d'utilisation et/ou de fonctionnement ne pourrait alors pas être garantie.

Nos conditions générales de vente et de livraison garantissent la qualité irréprochable de nos produits.

Les indications sur les brevets, les droits de marque ou autres droits de propriété intellectuelle existants sont juridiquement non contraignants.

En cas d'utilisation intrabuccale, il convient de sécuriser les produits contre l'aspiration et la déglutition.

UNITÉS DE CONDITIONNEMENT

Sauf mention contraire, conditionnement à l'unité.

LE SYSTÈME D'IMPLANTS CONELOG®

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

EXPLICATIONS SUR LES SYMBOLES/SIGNES FIGURANT SUR LES EMBALLAGES/ÉTIQUETTES PRODUIT ET SUR LES NOTICES JOINTES À L'EMBALLAGE

	Stérilisé par irradiation
	Non stérile
	Attention, suivre les instructions
	Ne pas utiliser après
	Ne pas réutiliser
	Par numéro d'article
	Désignation du lot
	Fabricant
	Limite de température
Rx only	Attention : conformément à la loi fédérale américaine, ce produit ne peut être vendu directement qu'à des médecins qualifiés ou aux personnes mandatées par ceux-ci.

CODE COULEUR DES PRODUITS CHIRURGICAUX ET PROTHÉTIQUES CAMLOG®/CONELOG®

	Couleur	Diamètre
	gris	3,3 mm
	jaune	3,8 mm
	rouge	4,3 mm
	bleu	5,0 mm
	vert	6,0 mm

LE SYSTÈME D'IMPLANTS CONELOG®

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Emballage extérieur :

scellé, codé par couleur, boîte pliante avec étiquette produit

Emballage secondaire :

scellé

Emballage intérieur de l'implant (emballage primaire) :

scellé, codé par couleur

Exemple d'étiquette produit de l'emballage primaire d'un implant

The diagram shows a product label for a camlog implant. The label is rectangular with a white background and a purple border. It contains the following information:

- Top section:** camlog logo, article number C1062.4313, diameter and length Ø 4.3 L 13, and quantity 1 St./pc.
- Second section:** CONELOG® SCREW-LINE Implantat Promote® plus, CONELOG® SCREW-LINE Implant, Promote® plus, use by date 2015-09, and lot number 1234567890.
- Third section:** Two barcodes. The first is a standard barcode with the number +E219C186243131E. The second is a HIBC barcode with the number +123456789ER.
- Bottom section:** Rx only, Hersteller / Manufacturer ALTATEC GmbH Maybachstrasse 5 D-71299 Wimsheim, CE 0124, Made in Germany, and a warning symbol.
- Right side:** A vertical purple bar with the camlog logo, article number C1062.4313, diameter and length Ø 4.3 L 13, and lot number 1234567890.

Annotations and arrows point to specific fields on the label:

- Indication du type d'implant :** SL : SCREW-LINE (points to the top right corner).
- Implant/Surface** (points to the top right corner).
- Symbole de stérilisation par irradiation aux rayons gamma** (points to the top right corner).
- Code-barre HIBC** (points to the bottom left corner).
- Attention : conformément à la loi fédérale américaine, ce produit ne peut être vendu directement qu'à des médecins qualifiés ou aux personnes mandatées par ceux-ci.** (points to the bottom left corner).
- Numéro d'article avec indication du diamètre et de la longueur en mm (ex. C: CONELOG®)** (points to the article number C1062.4313).
- Gamme de produits** (points to the article number C1062.4313).
- Longueur** (points to the length L 13).
- Ne pas réutiliser** (points to the Do not reuse symbol).
- Date d'expiration de la stérilité** (points to the use by date 2015-09).
- Numéro de lot** (points to the lot number 1234567890).
- Le point vert** (points to the CE 0124 mark).
- Attention, consulter les notices** (points to the warning symbol).
- Code couleur par diamètre d'implant** (points to the vertical purple bar).
- Adresse du fabricant** (points to the Hersteller / Manufacturer information).

CHIRURGIE

TABLE DES MATIÈRES

CHIRURGIE	13
PLANIFICATION	14
GRILLES DE PLANIFICATION RADIOLOGIQUE ET CALQUES D'IMPLANT AUTOCOLLANTS	14
PLANIFICATION PAR TOMOGRAPHIE INFORMATISÉE	15
GAMMES D'IMPLANTS	16
IMPLANTS CONELOG® SCREW-LINE	17
SET CHIRURGICAL CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE	18
INSTRUMENTS CHIRURGICAUX SCREW-LINE	19
SET D'OSTÉOTOMIE SCREW-LINE	22
COIFFE DE CICATRISATION CONELOG®	26
SET ALTAPIN	28
SET D'ÉLEVATION SINUSIENNE	29
INSTRUMENTS	30
INSTRUMENTS CHIRURGICAUX	30
INSTRUMENTS CHIRURGICO-PROTHÉTIQUES	32


GRILLES DE PLANIFICATION RADIOLOGIQUE/CALQUES D'IMPLANT AUTOCOLLANTS

N° d'article

Article


en mm

C5300.9010

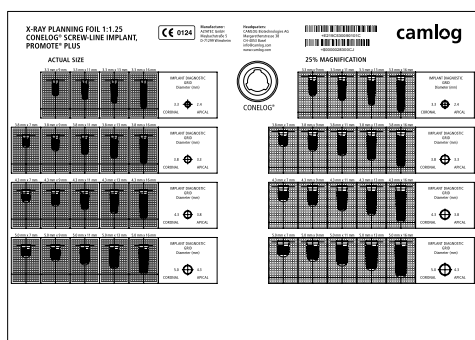


Grille de planification radiologique,
échelle 1:1,25
Implants CONELOG® SCREW-LINE
Promote® plus
Grossissement 25 %

C5300.9011

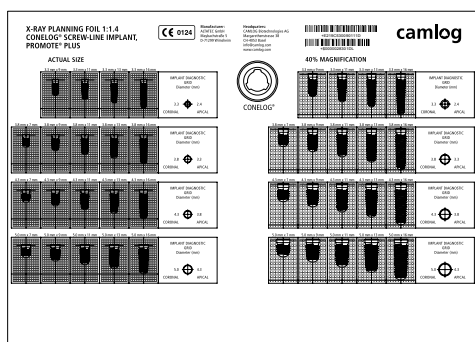

**Grille de planification radiologique,
échelle 1:1,4
Implants CONELOG® SCREW-LINE
Promote® plus
Grossissement 40 %**

C5300.9080

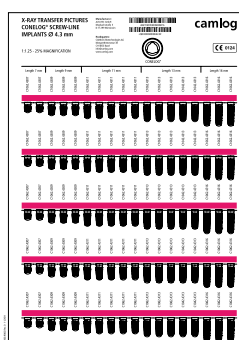

Calques d'implant autocollants, échelle
1:1,25
Implants CONELOG® SCREW-LINE
Promote® plus

3,3

C5300.9081

**Implants CONELOG® SCREW-LINE
Promote® plus**

3,8

C5300.9082

Grilles de planification, autocollantes
Grossissement 25 %

4,3

C5300.9083

5,0

CHIRURGIE

PLANIFICATION PAR TOMOGRAPHIE INFORMATISÉE


N° d'article		Article	Matériau
A2002.2000		Tube de guidage pour foret Ø 2,0 mm, douille de forage cannelée Longueur 4,0/10,0 mm Diamètre intérieur 2,1 mm Diamètre extérieur 2,5 mm Pack de 10	Alliage de titane
A2222.2200		Tube de guidage pour foret Ø 2,2 mm, douille de forage cannelée Longueur 4,0/10,0 mm Diamètre intérieur 2,3 mm Diamètre extérieur 2,7 mm Pack de 10	Alliage de titane
A2050.2600		Foret pour mise en place des tubes de guidage cannelés (pour A2002.2000), Ø 2,6 mm	Acier inoxydable
A2050.2800		Foret pour mise en place des tubes de guidage cannelés (pour A2222.2200), Ø 2,8 mm	Acier inoxydable

CHIRURGIE

GAMMES D'IMPLANTS


	Ø 3,3 mm	Ø 3,8 mm	Ø 4,3 mm	Ø 5,0 mm
Longueur 7 mm		C1062.3807 	C1062.4307 	C1062.5007 
Longueur 9 mm	C1062.3309 	C1062.3809 	C1062.4309 	C1062.5009 
Longueur 11 mm	C1062.3311 	C1062.3811 	C1062.4311 	C1062.5011 
Longueur 13 mm	C1062.3313 	C1062.3813 	C1062.4313 	C1062.5013 
Longueur 16 mm	C1062.3316 	C1062.3816 	C1062.4316 	C1062.5016 
Ø apical (moyenne)	2,7 mm	3,5 mm	3,9 mm	4,6 mm

Remarque : la longueur d'implant correspond à la distance entre le galbe apical et la surface plane occlusale de l'implant.

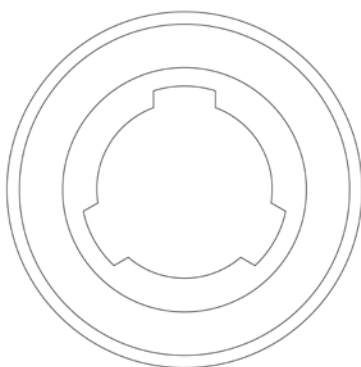

CHIRURGIE

IMPLANTS CONELOG® SCREW-LINE

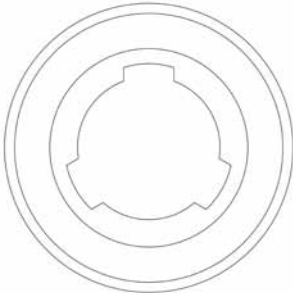N° d'article	Article	Ø en mm	Longueur en mm	Matériau
C1062.3309	 Implant CONELOG® SCREW-LINE, Promote® plus avec porte-implant CONELOG® et vis de fermeture CONELOG®	3,3	9	Titane grade 4
C1062.3311			11	Titane grade 4
C1062.3313			13	Titane grade 4
C1062.3316			16	Titane grade 4
C1062.3807	 	3,8	7	Titane grade 4
C1062.3809			9	Titane grade 4
C1062.3811			11	Titane grade 4
C1062.3813			13	Titane grade 4
C1062.3816			16	Titane grade 4
C1062.4307		4,3	7	Titane grade 4
C1062.4309			9	Titane grade 4
C1062.4311			11	Titane grade 4
C1062.4313			13	Titane grade 4
C1062.4316			16	Titane grade 4
C1062.5007		5,0	7	Titane grade 4
C1062.5009			9	Titane grade 4
C1062.5011			11	Titane grade 4
C1062.5013			13	Titane grade 4
C1062.5016			16	Titane grade 4

Tous les implants CONELOG® sont conditionnés dans des emballages stériles.

Surface : Promote®

Remarques importantes

- La préparation du site de l'implant pour les implants CONELOG® SCREW-LINE est identique à celle pour les implants CAMLOG® SCREW-LINE.
- Pour les implants CONELOG® SCREW-LINE, il existe des composants prothétiques CONELOG® spécifiques.

CHIRURGIE

SET CHIRURGICAL CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE

N° d'article

Article

J5300.0057

Set chirurgical CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE

Contient les instruments chirurgicaux nécessaires, classés par code couleur, y compris une clé dynamométrique et une clé universelle de contre-couple (les forets et tarauds Ø 6,0 mm ne sont pas inclus)



Remarque : la préparation du site de l'implant pour les implants CAMLOG® SCREW-LINE est identique à celle pour les implants CONELOG® SCREW-LINE.

CHIRURGIE

INSTRUMENTS CHIRURGICAUX SCREW-LINE

N° d'article		Article	Ø en mm	Longueur en mm	Matériau
J5050.2300*		Fraise boule re-stérilisable	2,3	—	Acier inoxydable
J5050.3500		Fraise boule re-stérilisable	3,5	—	Acier inoxydable
J5005.2003		Foret pilote sans collet, re-stérilisable	2,0	—	Acier inoxydable
J5051.2000*		Foret pilote SCREW-LINE collet réduit re-stérilisable	2,0	—	Acier inoxydable
J5051.2800*		Pré-foret SCREW-LINE re-stérilisable	1,7–2,8	—	Acier inoxydable
J5015.0007*		Butée de profondeur SCREW-LINE pour foret pilote (J5051.200) et pré-foret (J5051.2800), avec collet réduit, re-stérilisable	—	7	Acier inoxydable
J5015.0009*			—	9	Acier inoxydable
J5015.0011*			—	11	Acier inoxydable
J5015.0013*			—	13	Acier inoxydable

* Les instruments figurant ci-dessus sont également compris dans le set chirurgical CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE.

CHIRURGIE

INSTRUMENTS CHIRURGICAUX SCREW-LINE

N° d'article		Article	Ø en mm	Longueur en mm	Matériau
J5052.3309 J5052.3311 J5052.3313 J5052.3316		Foret calibre SCREW-LINE, irrigation externe, avec collet réduit, re-stérilisable	3,3	9 11 13 16	Acier inoxydable
J5052.3807 J5052.3809 J5052.3811 J5052.3813 J5052.3816			3,8	7 9 11 13 16	Acier inoxydable
J5052.4307 J5052.4309 J5052.4311 J5052.4313 J5052.4316			4,3	7 9 11 13 16	Acier inoxydable
J5052.5007 J5052.5009 J5052.5011 J5052.5013 J5052.5016			5,0	7 9 11 13 16	Acier inoxydable
J5015.3300		Butée de profondeur pour foret SCREW-LINE, avec collet réduit, re-stérilisable	3,3	—	Alliage de titane
J5015.3800			3,8	—	Alliage de titane
J5015.4300			4,3	—	Alliage de titane
J5015.5000			5,0	—	Alliage de titane

Les instruments figurant ci-dessus sont également compris dans le set chirurgical CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE.

CHIRURGIE

INSTRUMENTS CHIRURGICAUX SCREW-LINE

N° d'article		Article	Ø en mm	Longueur en mm	Matériau
J5053.3316		Foret calibré SCREW-LINE irrigation externe, os cortical, re-stérilisable	3,3	—	Acier inoxydable
J5053.3816			3,8	—	Acier inoxydable
J5053.4316			4,3	—	Acier inoxydable
J5053.5016			5,0	—	Acier inoxydable
J5054.3309		Taraud SCREW-LINE, à 6 pans, re-stérilisable	3,3	—	Acier inoxydable
J5054.3809			3,8	—	Acier inoxydable
J5054.4309			4,3	—	Acier inoxydable
J5054.5009			5,0	—	Acier inoxydable

Les instruments figurant ci-dessus sont également compris dans le set chirurgical CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE.

CHIRURGIE

SET D'OSTÉOTOMIE SCREW-LINE

N° d'article

Article

Ø
en mm

Matériau

J5418.0020



Set d'ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE, instruments droits-convexes

Contenu :

J5417.2800 Pré-ostéotome SCREW-LINE, droit-convexe	1,7–2,8
J5418.3300 Ostéotome SCREW-LINE, droit-convexe	3,3
J5418.3800 Ostéotome SCREW-LINE, droit-convexe	3,8
J5418.4300 Ostéotome SCREW-LINE, droit-convexe	4,3
J5418.5000 Ostéotome SCREW-LINE, droit-convexe	5,0
J5418.6000 Ostéotome SCREW-LINE, droit-convexe	6,0**

** uniquement pour les implants CAMLOG® SCREW-LINE Ø 6,0 mm

J5417.2800



Pré-ostéotome SCREW-LINE
droit-convexe

1,7–2,8 Acier inoxydable

J5418.3300



Ostéotome SCREW-LINE
droit-convexe

3,3 Acier inoxydable

J5418.3800



3,8 Acier inoxydable

J5418.4300



4,3 Acier inoxydable

J5418.5000



5,0 Acier inoxydable




CHIRURGIE

SET D'OSTÉOTOMIE SCREW-LINE

N° d'article	Article	Ø en mm	Matériau
--------------	---------	------------	----------

J5418.0030

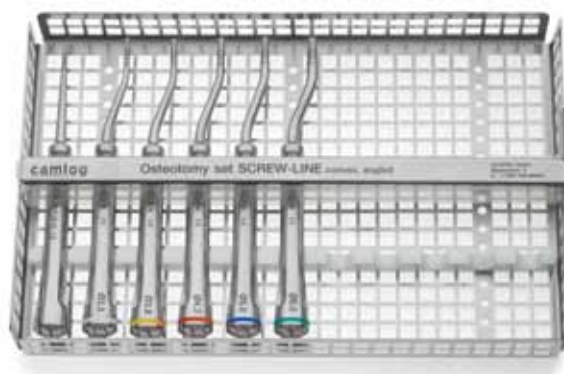

Set d'ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE, instruments angulés-convexes

Contenu :

J5417.2800 Pré-ostéotome SCREW-LINE, droit-convexe	1,7–2,8
J5418.3310 Ostéotome SCREW-LINE, angulé-convexe	3,3
J5418.3810 Ostéotome SCREW-LINE, angulé-convexe	3,8
J5418.4310 Ostéotome SCREW-LINE, angulé-convexe	4,3
J5418.5010 Ostéotome SCREW-LINE, angulé-convexe	5,0
J5418.6010 Ostéotome SCREW-LINE, angulé-convexe	6,0**

** uniquement pour les implants CAMLOG® SCREW-LINE Ø 6,0 mm

J5417.2800



Pré-ostéotome SCREW-LINE
droit-convexe

1,7–2,8 Acier inoxydable

J5418.3310



Ostéotome SCREW-LINE
angulé-convexe

3,3 Acier inoxydable

J5418.3810



3,8 Acier inoxydable

J5418.4310



4,3 Acier inoxydable

J5418.5010



5,0 Acier inoxydable



CHIRURGIE

SET D'OSTÉOTOMIE SCREW-LINE

N° d'article

Article

Ø
en mm

Matériau

J5420.0020*



Set d'ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE, instruments droits-concaves

Contenu :

J5419.2800 Pré-ostéotome SCREW-LINE, droit-concave	1,7–2,8
J5420.3300 Ostéotome SCREW-LINE, droit-concave	3,3
J5420.3800 Ostéotome SCREW-LINE, droit-concave	3,8
J5420.4300 Ostéotome SCREW-LINE, droit-concave	4,3
J5420.5000 Ostéotome SCREW-LINE, droit-concave	5,0
J5420.6000 Ostéotome SCREW-LINE, droit-concave	6,0**

** uniquement pour les implants CAMLOG® SCREW-LINE Ø 6,0 mm

J5419.2800*



Pré-ostéotome SCREW-LINE
droit-concave

1,7–2,8 Acier inoxydable

J5420.3300*



Ostéotome SCREW-LINE
droit-concave

3,3 Acier inoxydable

J5420.3800*



3,8 Acier inoxydable

J5420.4300*



4,3 Acier inoxydable

J5420.5000*



5,0 Acier inoxydable



* disponible à compter de décembre 2011

CHIRURGIE

SET D'OSTÉOTOMIE SCREW-LINE

N° d'article	Article	Ø en mm	Matériau
--------------	---------	------------	----------

J5420.0030*



Set d'ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE, instruments angulés-concaves

Contenu :

J5419.2800 Pré-ostéotome SCREW-LINE, droit-concave	1,7–2,8
J5420.3310 Ostéotome SCREW-LINE, angulé-concave	3,3
J5420.3810 Ostéotome SCREW-LINE, angulé-concave	3,8
J5420.4310 Ostéotome SCREW-LINE, angulé-concave	4,3
J5420.5010 Ostéotome SCREW-LINE, angulé-concave	5,0
J5420.6010 Ostéotome SCREW-LINE, angulé-concave	6,0**

** uniquement pour les implants CAMLOG® SCREW-LINE Ø 6,0 mm

J5419.2800*



Pré-ostéotome SCREW-LINE
droit-concave

1,7–2,8 Acier inoxydable

J5420.3310*



Ostéotome SCREW-LINE
angulé-concave

3,3 Acier inoxydable

J5420.3810*



3,8 Acier inoxydable

J5420.4310*



4,3 Acier inoxydable

J5420.5010*



5,0 Acier inoxydable



* disponible à compter de décembre 2011

CHIRURGIE

COIFFES DE CICATRISATION CONELOG®

N° d'article	Article	Ø en mm	HG en mm	Matériau
C2015.3320 C2015.3340	 Coiffe de cicatrisation CONELOG®, cylindrique	3,3	2,0 4,0	Alliage de titane
C2015.3820 C2015.3840 C2015.3860	 	3,8	2,0 4,0 6,0*	Alliage de titane
C2015.4320 C2015.4340 C2015.4360		4,3	2,0 4,0 6,0*	Alliage de titane
C2015.5020 C2015.5040 C2015.5060		5,0	2,0 4,0 6,0*	Alliage de titane
C2014.3340	 Coiffe de cicatrisation CONELOG®, évasée	3,3	4,0	Alliage de titane
C2014.3840 C2014.3860	 	3,8	4,0 6,0	Alliage de titane
C2014.4340 C2014.4360		4,3	4,0 6,0	Alliage de titane
C2014.5040 C2014.5060		5,0	4,0 6,0	Alliage de titane

* Convient pour l'enregistrement de l'occlusion.
Toutes les coiffes de cicatrisation sont conditionnées dans
des emballages stériles.

HG : hauteur gingivale

CHIRURGIE

COIFFE DE CICATRISATION CONELOG®

N° d'article	Article		Ø en mm	HG en mm	Matériau
C2011.3340		Coiffe de cicatrisation CONELOG®, bottleneck	3,3	4,0	Alliage de titane
C2011.3840 C2011.3860			3,8	4,0 6,0	Alliage de titane
C2011.4340 C2011.4360			4,3	4,0 6,0	Alliage de titane
C2011.5040 C2011.5060			5,0	4,0 6,0	Alliage de titane

Toutes les coiffes de cicatrisation sont conditionnées dans des emballages stériles.

HG : hauteur gingivale

CHIRURGIE

SET ALTAPIN

N° d'article	Article	Matériau
M5600.0110	ALTApin Set Système de fixation de membrane, re-stérilisable Contenu : M5100.0010 Applicateur ALTApin, droit M5100.0050 Pointeau ALTApin (support) M5100.0070 Fixateur de membrane ALTApin M5200.0055 Pointeau ALTApin, pointe de rechange, 2 pièces M1000.0050 Distributeur ALTApin, 7 clous en titane, 4 pièces	Plastique/ Alliage de titane/ Acier inoxydable
M5600.0210	Trousse chirurgicale ALTApin	Plastique
M5100.0010	Applicateur ALTApin, droit avec activateur	Acier inoxydable
M5100.0030	Applicateur ALTApin, angulé 90° avec activateur	Acier inoxydable
M5200.0010	Applicateur ALTApin, droit, partie travaillante avec activateur	Acier inoxydable
M5100.0050	Pointeau ALTApin	Acier inoxydable
M5100.0070	Fixateur de membrane ALTApin	Acier inoxydable
M5100.0100	Maillet chirurgical ALTApin	Acier inoxydable
M5500.0050	Foret à usage unique ALTApin, norme ISO	Acier inoxydable
M5200.0055	Pointe de rechange pour le pointeau ALTApin	Acier inoxydable
M1000.0050	Distributeur ALTApin 7 clous en titane, double emballage stérile, 1 pièce	Alliage de titane
M1000.0100	Distributeur ALTApin 7 clous en titane, double emballage stérile, 3 pièces	Alliage de titane

CHIRURGIE

SET D'ÉLEVATION SINUSIENNE

N° d'article

Article

Matériau

T2010.0010

Set d'élévation sinusienne
selon Dr Kirsch/Ackermann



Contenu :



Râpe universelle

Acier inoxydable



Élévateur 25°/25°

Acier inoxydable



Élévateur 60°/60°

Acier inoxydable



Élévateur 90°/90°

Acier inoxydable



Élévateur 120°/120°

Acier inoxydable



Élévateur 90°/90°/60°

Acier inoxydable



Élévateur 90°/90°

Acier inoxydable



Fouloir Ø 4,7 mm ; **curette** Ø 7,5 mm

Acier inoxydable



Fouloir Ø 2,6 mm ; **poire** Ø 4,5 mm

Acier inoxydable



Cupule inox

Acier inoxydable

CHIRURGIE

INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

N° d'article		Article	Dimensions en mm	Matériau
J5300.2028		Pilier de parallélisme SCREW-LINE, avec marquages de profondeur	Ø 1,7–2,8/ 2,0	Alliage de titane
J5002.0005		Prolongateur de foret norme ISO	26,6	Acier inoxydable
J5322.0010		Adaptateur manuel pour le taraud, court pour taraud SCREW-LINE	18,0	Acier inoxydable
J5322.0011		Adaptateur pour taraud, long pour taraud SCREW-LINE	23,0	Acier inoxydable
J5300.0007		Instrument de pose pour implants vissés, avec norme ISO pour contre-angle	27,5	Acier inoxydable
J5300.0008		Instrument de pose d'implant, court pour implants à vissés, manuel/clé dynamométrique avec perçage pour tourne-vis à six pans, long	18,0	Acier inoxydable
J5300.0009		Instrument de pose d'implant, long pour implants vissés, manuel/clé dynamométrique	27,0	Acier inoxydable

CHIRURGIE

INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

N° d'article	Article	Dimensions en mm	Matériau
J5300.0010	Clé à cardans (30°) (instrument de vissage) pour tout type d'implants vissés, longueur réglable	–	Acier inoxydable
			
J5300.0030	Instrument pick-up outil pour désinsérer des porte-implants	–	Acier inoxydable
			
J5002.0010	 Adaptateur manuel norme ISO pour contre-angle/clé dynamométrique	21,0	Acier inoxydable
J5302.0010	 Clé universelle de contre-couple	–	Acier inoxydable
C5302.3310	 Instrument d'insertion des implants, long pour implants CONELOG® SCREW-LINE	3,3	Acier inoxydable
C5302.3810		3,8	Acier inoxydable
C5302.3810		4,3	Acier inoxydable
J5302.3300	 Gaine de maintien pour implants code couleur	3,3	Alliage de titane
J5302.3800		3,8	Alliage de titane
J5302.4300		4,3	Alliage de titane
J5002.0012	 Aiguille de nettoyage pour foret à irrigation interne		Acier inoxydable
J5002.0020	 Canule de nettoyage pour foret à irrigation interne		Acier inoxydable

CHIRURGIE

INSTRUMENTS CHIRURGICO-PROTHÉTIQUES

N° d'article	Article	Longueur en mm	Matériau
--------------	---------	----------------	----------

J5330.8600



Trousse prothétique

Contenu :

J5320.1030 Clé dynamométrique

Tournevis :

J5316.0501 à six pans, court, manuel/clé à cliquet

J5316.0502 à six pans, long, manuel/clé dynamométrique

J5316.0503 à six pans, long, norme ISO

J5316.0504 à six pans, court, norme ISO

Plastique/

Acier inoxydable

J5330.8500

Trousse prothétique (vide)

Plastique

J5316.0510



Tournevis

à six pans, extra court, manuell/clé dynamométrique

14,5

Acier inoxydable

J5316.0501



Tournevis

à six pans, court, manuell/clé dynamométrique

22,5

Acier inoxydable

J5316.0502



Tournevis

à six pans, long, manuell/clé dynamométrique

30,3

Acier inoxydable

J5316.0504



Tournevis

à six pans, court, norme ISO

18,0

Acier inoxydable

J5316.0503



Tournevis

à six pans, long, norme ISO

26,0

Acier inoxydable

J5320.1030

Clé dynamométrique

avec réglage en continu du moment de torsion jusqu'à 30 Ncm max.

—

Acier inoxydable



C5300.1601



Déconnecteur CONELOG®

pour piliers CONELOG® Ø 3,3/3,8/4,3 mm
Filetage M 1.6

Acier inoxydable

C5300.2001



Déconnecteur CONELOG®

pour piliers CONELOG® Ø 5,0 mm
Filetage M 2.0

Acier inoxydable

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

TABLE DES MATIÈRES

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

	33
APERÇU DE L'OFFRE PROTHÉTIQUE	34

RÉGLAGE DE LIMITATION DU COUPLE	37
---------------------------------	----

PRISE D'EMPREINTE, ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION, FABRICATION DU MODÈLE	38
--	----

PRISE D'EMPREINTE, PORTE-EMPREINTE OUVERT/FERMÉ	38
---	----

ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION	39
-------------------------------	----

FABRICATION DU MODÈLE	39
-----------------------	----

RESTAURATIONS SUR COURONNES ET BRIDGES	39
--	----

PILIER PROVISOIRE CONELOG®	39
----------------------------	----

PILIER CONELOG® ESTHOMIC®	40
---------------------------	----

PILIER UNIVERSEL CONELOG®	42
---------------------------	----

PILIER OR-PLASTIQUE CONELOG®	42
------------------------------	----

ACCESSOIRES POUR PILIERS CAMLOG®	43
----------------------------------	----

RESTAURATIONS SUR COURONNES, SUR BRIDGES ET HYBRIDES	44
---	----

PILIER CONELOG® VARIO SR	44
--------------------------	----

ACCESSOIRES POUR VARIO SR	48
---------------------------	----

RESTAURATIONS HYBRIDES	50
------------------------	----

PILIER UNIVERSEL CONELOG®	50
---------------------------	----

PILIER TÉLESCOPE CONELOG®	50
---------------------------	----

ACCESSOIRES POUR PILIERS CAMLOG®	51
----------------------------------	----

INSTRUMENTS DENTAIRE	52
----------------------	----

PILIER DE SÉLECTION CONELOG® ESTHOMIC®	53
--	----

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

APERÇU DU SYSTÈME PROTHÉTIQUE

Article		HG en mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,8 mm	Ø 4,3 mm	Ø 5,0 mm
Prise d'empreinte de l'implant	Pilier de prise d'empreinte CONELOG®, porte-empreinte ouvert		C2121.3300	C2121.3800	C2121.4300	C2121.5000
	Pilier de prise d'empreinte CONELOG®, porte-empreinte fermé		C2110.3300	C2110.3800	C2110.4300	C2110.5000
	Capuchon de repositionne- ment pour pilier de prise d'empreinte, porte-empreinte fermé		J2111.3300	J2111.3800	J2111.4300	J2111.5000
Fabrication du modèle	Analogue de laboratoire CONELOG®		C3010.3300	C3010.3800	C3010.4300	C3010.5000
Piliers pour restaurations sur couronnes ou bridges	Pilier provisoire CONELOG®		—	C2239.3800	C2239.4300	C2239.5000
	Piliers CONELOG® Esthomic®, droits	 1,5–2,5 3,0–4,5	—	C2226.3815 C2226.3830	C2226.4315 C2226.4330	C2226.5015 C2226.5030
	Piliers CONELOG® Esthomi angulés à 15°, type A	 1,5–2,5 3,0–4,5	—	C2227.3815 C2227.3830	C2227.4315 C2227.4330	C2227.5015 C2227.5030
	Piliers de sélection CONELOG® Esthomic®, angulés à 15°, type B	 1,5–2,5 3,0–4,5	—	C2228.3815 C2228.3830	C2228.4315 C2228.4330	C2228.5015 C2228.5030
	Piliers CONELOG® Esthomic® angulés à 20°, type A	 1,5–2,5 3,0–4,5	—	C2231.3815 C2231.3830	C2231.4315 C2231.4330	C2231.5015 C2231.5030
	Piliers de sélection CONELOG® Esthomic®, angulés à 20°, type B	 1,5–2,5 3,0–4,5	—	C2232.3815 C2232.3830	C2232.4315 C2232.4330	C2232.5015 C2232.5030
	Pilier CONELOG® Esthomic® Inset	 2,0–3,3	C2235.3320	C2235.3820	C2235.4320	C2235.5020

HG : hauteur gingivale

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

APERÇU DU SYSTÈME PROTHÉTIQUE

Article		HG en mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,8 mm	Ø 4,3 mm	Ø 5,0 mm
Piliers pour restaurations sur couronnes ou bridges	Pilier universel CONELOG®		C2211.3300	C2211.3800	C2211.4300	C2211.5000
	Pilier or-plastique CONELOG®		C2246.3300	C2246.3800	C2246.4300	C2246.5000
Piliers pour restaurations sur couronnes ou sur bridges ou hybrides	Pilier CONELOG® Vario SR, droit		—	C2560.3808	C2560.4308	C2560.5008
	Pilier CONELOG® Vario SR, angulé 20°		—	C2561.3800	C2561.4300	C2561.5000
	Pilier CONELOG® Vario SR, angulé 30°		—	C2562.3800	C2562.4300	C2562.5000
	Transfert d'empreinte pour pilier Vario SR, porte-empreinte ouvert		—	J2566.4300	J2566.4300	J2566.6000
	Transfert d'empreinte pour pilier Vario SR, porte-empreinte fermé		—	J2565.4300	J2565.4300	J2565.6000
	Analogue de laboratoire Vario SR		—	J2567.4300	J2567.4300	J2567.6000
	Coiffe calcinable Vario SR pour couronne, à trois surfaces anti-rotationnelles		—	J2563.4302	J2563.4302	J2563.6002
	Coiffe calcinable Vario SR pour bridge		—	J2563.4301	J2563.4301	J2563.6001

HG : hauteur gingivale

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

APERÇU DU SYSTÈME PROTHÉTIQUE

Article		HG en mm	Ø 3,3 mm	Ø 3,8 mm	Ø 4,3 mm	Ø 5,0 mm
Piliers pour restaurations sur couronnes ou sur bridges ou hybrides	Coiffe calcinable Vario SR pour couronne, à une seule surface anti-rotationnelle pour piliers Vario SR angulés		—	J2563.4303	J2563.4303	J2563.6003
	Coiffe en titane Vario SR pour bridge		—	J2564.4301	J2564.4301	J2564.6001
	Coiffe pour barre Vario SR		—	J2570.4300	J2570.4300	J2570.6000
Structures et piliers pour les restaurations hybrides	Pilier universel CONELOG® pour la restauration à coiffes télescopiques		—	C2211.3800	C2211.4300	C2211.5000
	Pilier télescope CONELOG® pour la restauration à coiffes télescopiques		—	C2212.3800	C2212.4300	C2212.5000


HG : hauteur gingivale

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

RÉGLAGE DE LIMITATION DU MOMENT DE TORSION

POUR LA FIXATION DÉFINITIVE DES COMPOSANTS CHIRURGICAUX ET DES SUPERSTRUCTURES

Article

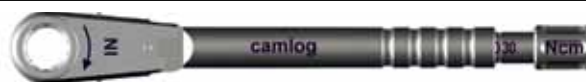

J5320.1030

Vis de fermeture pour implant CONELOG® :



Coiffes de cicatrisation CONELOG® :

cylindrique
évasée
bottleneck



Capuchons de protection du pilier Vario SR



Vis de laboratoire CONELOG® :



Vis de laboratoire CONELOG® Vario SR (pour piliers droits):



Pilier provisoire CONELOG®



Vis de pilier CONELOG® :



Vis de pilier CONELOG® Vario SR (pour piliers droits):



Pilier CONELOG® Esthomic®, droit
Piliers CONELOG® Esthomic®, angulés à 15°/20°, type A et B
Pilier CONELOG® Esthomic®, Inset



Pilier or-plastique CONELOG®
Pilier universel CONELOG®
Pilier télescope CONELOG®


(de gauche à droite)



Pilier CONELOG® Vario SR, droit
Piliers CONELOG® Vario SR, angulés 20°/30°



Vis prothétique Vario SR :

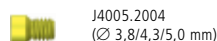

Coiffes calcinables

Vario SR/

Coiffes en titane/bases pour barre



J5316.0510 0 (à six pans, extracourt)



J5316.0501 (à six pans, court)



J5316.0502 (à six pans, long)



Vissage à la main

20 Ncm

15 Ncm

Toutes les vis doivent être resserrées après 5 minutes au moins en utilisant le moment de torsion adéquat !

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

PRISE D'EMPREINTE, ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION, FABRICATION DU MODÈLE

PRISE D'EMPREINTE

N° d'article	Article	Ø en mm	Dimensions en mm	Matériau
Pilier de prise d'empreinte CONELOG®, porte-empreinte ouvert (La vis de fixation peut être raccourcie de 3 mm avant l'insertion avec un tournevis à six pans)				
C2121.3300	 Pilier de prise d'empreinte CONELOG®, porte-empreinte ouvert, avec vis de fixation	3,3	19,3/22,3	Alliage de titane
C2121.3800		3,8	19,3/22,3	Alliage de titane
C2121.4300		4,3	19,3/22,3	Alliage de titane
C2121.5000		5,0	19,3/22,3	Alliage de titane

Pilier de prise d'empreinte CONELOG®, porte-empreinte fermé

C2110.3300	 Pilier de prise d'empreinte CONELOG®, porte-empreinte fermé, avec capuchon de repositionnement, capuchon d'enregistrement de l'occlusion et vis de fixation, hauteur prothétique 10,7 mm	3,3	—	Alliage de titane
C2110.3800		3,8	—	Alliage de titane
C2110.4300		4,3	—	Alliage de titane
C2110.5000		5,0	—	Alliage de titane

Capuchon de repositionnement de rechange pour pilier de prise d'empreinte, porte-empreinte fermé

J2111.3300	 Capuchon de repositionnement (5 pièces)	3,3	—	POM
J2111.3800		3,8	—	POM
J2111.4300		4,3	—	POM
J2111.5000		5,0	—	POM

POM : Polyoxyméthylène

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

PRISE D'EMPREINTE, ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION, FABRICATION DU MODÈLE

ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION

N° d'article	Article	Ø en mm	Dimensions en mm	Matériau
Capuchon d'enregistrement de l'occlusion				
J2112.3300	 Capuchon d'enregistrement de l'occlusion (5 pièces)	3,3	—	POM
J2112.3800		3,8	—	POM
J2112.4300		4,3	—	POM
J2112.5000		5,0	—	POM

FABRICATION DU MODÈLE

Analogue de laboratoire CONELOG® pour piliers CONELOG®

C3010.3300	 Analogue de laboratoire CONELOG®	3,3	—	Alliage de titane
C3010.3800		3,8	—	Alliage de titane
C3010.4300		4,3	—	Alliage de titane
C3010.5000		5,0	—	Alliage de titane

RESTAURATIONS PAR COURONNES UNITAIRES

RESTAURATION PROVISOIRE

Pilier provisoire CONELOG®

C2239.3800	 Pilier provisoire CONELOG®, personnalisable, avec vis de pilier CONELOG®	3,8	—	Alliage de titane
C2239.4300		4,3	—	Alliage de titane
C2239.5000		5,0	—	Alliage de titane

POM : polyoxyméthylène

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

RESTAURATIONS SUR COURONNES ET BRIDGES


PILERS CONELOG® ESTHOMIC® POUR LES RESTAURATIONS SUR COURONNES ET BRIDGES SCELLÉES

N° d'article	Article	Ø en mm	HG en mm	Matériau
--------------	---------	------------	-------------	----------


Piliers CONELOG® Esthomic®, droits

C2226.3815 C2226.3830	 Piliers CONELOG® Esthomic®, droits, personnalisables, avec vis de pilier CONELOG®	3,8	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane
C2226.4315 C2226.4330		4,3	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane
C2226.5015 C2226.5030		5,0	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane

Piliers CONELOG® Esthomic®, angulés à 15°, type A

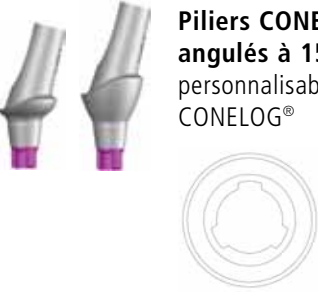C2227.3815 C2227.3830	 Piliers CONELOG® Esthomic®, angulés à 15°, type A, personnalisables, avec vis de pilier CONELOG®	3,8	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane
C2227.4315 C2227.4330		4,3	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane
C2227.5015 C2227.5030		5,0	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane

Piliers CONELOG® Esthomic®, angulés à 15°, type B

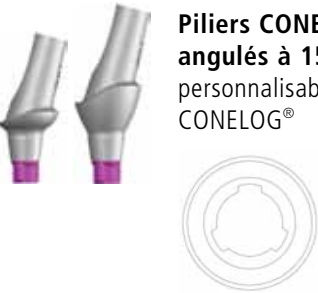
C2228.3815 C2228.3830	 Piliers CONELOG® Esthomic®, angulés à 15°, type B, personnalisables, avec vis de pilier CONELOG®	3,8	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane
C2228.4315 C2228.4330		4,3	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane
C2228.5015 C2228.5030		5,0	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane


HG : hauteur gingivale

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

RESTAURATIONS SUR COURONNES ET BRIDGES

PILIER CONELOG® ESTHOMIC® POUR LES RESTAURATIONS SUR COURONNES ET BRIDGES SCELLÉES

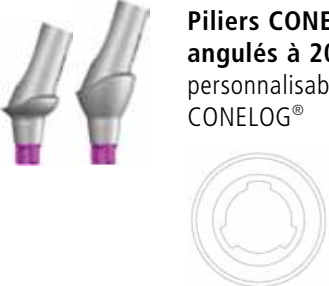N° d'article	Article	Ø en mm	HG en mm	Matériau
Piliers CONELOG® Esthomic®, angulés à 20°, type A				
C2231.3815 C2231.3830	 Piliers CONELOG® Esthomic®, angulés à 20°, type A, personnalisables, avec vis de pilier CONELOG®	3,8	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane
C2231.4315 C2231.4330		4,3	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane
C2231.5015 C2231.5030		5,0	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane

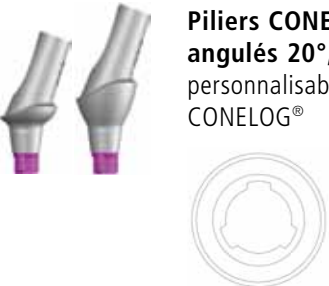Piliers CONELOG® Esthomic®, angulés à 20°, type B				
C2232.3815 C2232.3830	 Piliers CONELOG® Esthomic®, angulés 20°, type B, personnalisables, avec vis de pilier CONELOG®	3,8	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane
C2232.4315 C2232.4330		4,3	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane
C2232.5015 C2232.5030		5,0	1,5–2,5 3,0–4,5	Alliage de titane


Pilier CONELOG® Esthomic®, Inset				
C2235.3320	 Pilier CONELOG® Esthomic®, Inset, personnalisable, avec vis de pilier CONELOG®	3,3	2,0–3,3	Alliage de titane
C2235.3820		3,8	2,0–3,3	Alliage de titane
C2235.4320		4,3	2,0–3,3	Alliage de titane
C2235.5020		5,0	2,0–3,3	Alliage de titane

HG : hauteur gingivale

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

RESTAURATIONS SUR COURONNES ET BRIDGES

Description des piliers CONELOG® Esthomic® de type A et B

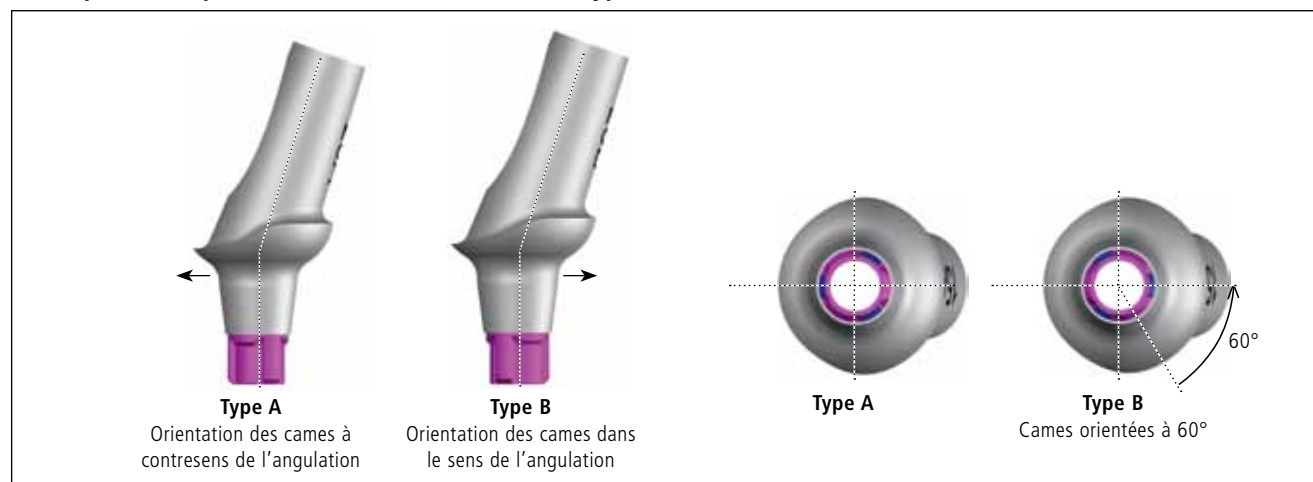

PILIER UNIVERSEL CONELOG® ESTHOMIC® POUR LES RESTAURATIONS SUR COURONNES ET BRIDGES SCELLÉES

N° d'article

Article

Ø
en mm

Dimensions
en mm

Matériau

Pilier universel CONELOG®

C2211.3300		Pilier universel CONELOG®, personnalisable, avec vis de pilier CONELOG®	3,3*	—	Alliage de titane
C2211.3800			3,8	—	Alliage de titane
C2211.4300			4,3	—	Alliage de titane
C2211.5000			5,0	—	Alliage de titane

PILIER OR-PLASTIQUE CONELOG® POUR LES RESTAURATIONS SUR COURONNES ET BRIDGES

Pilier or-plastique CONELOG®

C2246.3300		Pilier or-plastique CONELOG®, pour surcoulée, avec vis de pilier CONELOG®	3,3*	Poids de métal noble env. 0,31 g	Alliage d'or coulable/POM
C2246.3800			3,8	Poids de métal noble env. 0,36 g	Alliage d'or coulable/POM
C2246.4300			4,3	Poids de métal noble env. 0,36 g	Alliage d'or coulable/POM
C2246.5000			5,0	Poids de métal noble env. 0,55 g	Alliage d'or coulable/POM

* Uniquement pour les restaurations sur couronnes dans la zone des incisives latérales supérieures, et des incisives latérales et centrales inférieures
(le Ø 3,3 mm ne convient pas aux restaurations à coiffes télescopiques)

POM : polyoxyméthylène

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

RESTAURATIONS SUR COURONNES ET BRIDGES

ACCESSOIRES POUR PILIERS CAMLOG®

N° d'article	Article	Ø en mm	Dimensions en mm	Matériau
Vis de pilier CONELOG® pour le vissage définitif dans l'implant				
C4005.1601	 Vis de pilier CONELOG®, à six pans 	3,3	Filetage M 1.6	Alliage de titane
		3,8		
		4,3		
C4005.2001		5,0	Filetage M 2.0	Alliage de titane

Vis de laboratoire CONELOG® pour la fixation sur le modèle de travail

C4006.1601	 Vis de laboratoire CONELOG®, à six pans, brun anodisé 	3,3	Filetage M 1.6	Alliage de titane
		3,8		
		4,3		
C4006.2001		5,0	Filetage M 2.0	Alliage de titane

Remarque : l'utilisation des vis de laboratoire est autorisée uniquement sur le modèle de travail.

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

RESTAURATIONS SUR COURONNES, SUR BRIDGES ET HYBRIDES

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES VARIO SR POUR RESTAURATIONS OCCLUSALES VISSÉES

N° d'article	Article	Ø en mm	HG en mm	Matériau
--------------	---------	------------	-------------	----------

Pilier CONELOG® Vario SR, droit

C2560.3808		Pilier CONELOG® Vario SR, droit, avec vis de pilier CONELOG® Vario SR	3,8	1,0	Alliage de titane
C2560.4308			4,3	1,0	Alliage de titane
C2560.5008			5,0	1,0	Alliage de titane

Pilier CONELOG® Vario SR, angulé 20°

C2561.3800		Pilier CONELOG® Vario SR, angulé 20°, avec vis de pilier CONELOG®	3,8	3,5–1,9	Alliage de titane
C2561.4300			4,3	3,5–1,9	Alliage de titane
C2561.5000			5,0	4,0–1,8	Alliage de titane

Pilier CONELOG® Vario SR, angulé 30°

C2562.3800		Pilier CONELOG® Vario SR, angulé 30°, avec vis de pilier CONELOG®	3,8	3,5–1,1	Alliage de titane
C2562.4300			4,3	3,5–1,1	Alliage de titane
C2562.5000			5,0	4,5–1,3	Alliage de titane

HG : hauteur gingivale

Les piliers CONELOG® Vario SR sont conditionnés dans des emballages stériles.

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

RESTAURATIONS SUR COURONNES, SUR BRIDGES ET HYBRIDES

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES VARIO SR POUR RESTAURATIONS OCCLUSALES VISSÉES

N° d'article	Article	Ø en mm	HG en mm	Matériau	
Transferts d'empreinte Vario SR, porte-empreinte ouvert et fermé					
J2566.4300		Transfert d'empreinte Vario SR, porte-empreinte ouvert, avec vis de fixation pour Ø 3,8/4,3 mm	3,8	—	Alliage de titane
			4,3	—	Alliage de titane
J2566.6000		Transfert d'empreinte Vario SR, porte-empreinte ouvert, avec vis de fixation pour Ø 5,0 mm	5,0	—	Alliage de titane
J2565.4300		Transfert d'empreinte Vario SR, porte-empreinte fermé, pour Ø 3,8/4,3 mm	3,8	—	Alliage de titane
			4,3	—	Alliage de titane
J2565.6000		Transfert d'empreinte Vario SR, porte-empreinte fermé, pour Ø 5,0 mm	5,0	—	Alliage de titane
Fabrication du modèle Vario SR					
J2567.4300		Analogue de laboratoire Vario SR, pour Ø 3,8/4,3 mm	3,8	—	Alliage de titane
			4,3	—	Alliage de titane
J2567.6000		Analogue de laboratoire Vario SR, pour Ø 5,0 mm	5,0	—	Alliage de titane

HG : hauteur gingivale

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

RESTAURATIONS SUR COURONNES, SUR BRIDGES ET HYBRIDES

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES VARIO SR POUR RESTAURATIONS OCCLUSALES VISSÉES

N° d'article	Article	Ø en mm	HG en mm	Matériau	Prix (hors taxe)
Coiffes calcinables Vario SR pour restaurations coulées sur couronne, bridge et barre					
J2563.4302		Coiffe calcinable Vario SR pour couronne, avec trois surfaces anti-rotationnelles, pour Ø 3,8/4,3 mm	3,8	—	POM
			4,3	—	POM
J2563.6002		Coiffe calcinable Vario SR pour couronne, avec trois surfaces anti-rotationnelles, pour Ø 5,0 mm	5,0	—	POM
J2563.4301		Coiffe calcinable Vario SR pour bridge, pour Ø 3,8/4,3 mm (2 pièces)	3,8	—	POM
			4,3	—	POM
J2563.6001		Coiffe calcinable Vario SR pour bridge, pour Ø 5,0 mm (2 pièces)	5,0	—	POM
J2563.4303		Coiffe calcinable Vario SR pour couronne, à une seule surface anti-rotationnelle pour piliers Vario SR angulés, pour Ø 3,8/4,3 mm	3,8	—	POM
			4,3	—	POM
J2563.6003		Coiffe calcinable Vario SR pour couronne, à une seule surface anti-rotationnelle pour piliers Vario SR angulés, pour Ø 5,0 mm	5,0	—	POM

HG : hauteur gingivale POM : polyoxyméthylène

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

RESTAURATIONS SUR COURONNES, SUR BRIDGES ET HYBRIDES

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES VARIO SR POUR RESTAURATIONS OCCLUSALES VISSÉES

N° d'article	Article	Ø en mm	HG en mm	Matériau	
Coiffes en titane Vario SR pour restaurations sur bridges provisoires ou définitives					
J2564.4301		Coiffe en titane Vario SR pour bridge, pour Ø 3,8/4,3 mm, avec vis prothétique Vario SR	3,8	—	Alliage de titane
			4,3	—	Alliage de titane
J2564.6001		Coiffe en titane Vario SR pour bridge, pour Ø 5,0 mm, avec vis prothétique Vario SR	5,0	—	Alliage de titane
Coiffes pour barre Vario SR pour constructions sur barres soudées au laser					
J2570.4300		Coiffe pour barre Vario SR, pour soudure au laser, pour Ø 3,8/4,3 mm, avec vis prothétique Vario SR	3,8	—	Titane grade 4
			4,3	—	Titane grade 4
J2570.6000		Coiffe pour barre Vario SR, pour soudure au laser, pour Ø 5,0 mm, avec vis prothétique Vario SR	5,0	—	Titane grade 4

HG : hauteur gingivale

HG : hauteur gingivale

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

RESTAURATIONS SUR COURONNES, SUR BRIDGES ET HYBRIDES

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES VARIO SR POUR RESTAURATIONS OCCLUSALES VISSÉES

N° d'article	Article	Ø en mm	HG en mm	Matériau	
Accessoires pour Vario SR					
J2568.4300		Capuchon de protection Vario SR, pour Ø 3,8/4,3 mm (stérile)	3,8	—	Alliage de titane
			4,3	—	Alliage de titane
J2568.6000		Capuchon de protection Vario SR, pour Ø 5,0 mm (stérile)	5,0	—	Alliage de titane
J2569.0001		Jauge d'angulation 20° Vario SR, pour porte-implant, pour Ø 3,8/4,3/5,0 mm (stérile)	3,8	—	Copolycarbonate
			4,3	—	Copolycarbonate
			5,0	—	Copolycarbonate
J2569.0002		Jauge d'angulation 30° Vario SR, pour porte-implant, pour Ø 3,8/4,3/5,0 mm (stérile)	3,8	—	Copolycarbonate
			4,3	—	Copolycarbonate
			5,0	—	Copolycarbonate
C4007.1600		Vis de pilier CONELOG® Vario SR, à six pans, M 1.6, pour pilier CONELOG® Vario SR, droit, Ø 3,8/4,3 mm	3,8	—	Alliage de titane
			4,3	—	Alliage de titane
C4007.2000		Vis de pilier CONELOG® Vario SR, à six pans, M 2.0, pour pilier CONELOG® Vario SR, droit, Ø 5,0 mm	5,0	—	Alliage de titane
C4005.1601		Vis de pilier CONELOG®, à six pans, M 1.6, pour pilier CONELOG® Vario SR, angulé 20°/30°, Ø 3,8/4,3 mm	3,8	—	Alliage de titane
			4,3	—	Alliage de titane
C4005.2001		Vis de pilier CONELOG®, à six pans, M 2.0, pour pilier CONELOG® Vario SR, angulé 20°/30°, Ø 5,0 mm	5,0	—	Alliage de titane
J4005.2004		Vis prothétique Vario SR, à six pans, M 2.0, pour Ø 3,8/4,3/5,0 mm, jaune anodisé	3,8	—	Alliage de titane
			4,3	—	Alliage de titane
			5,0	—	Alliage de titane

HG : hauteur gingivale

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

RESTAURATIONS SUR COURONNES, SUR BRIDGES ET HYBRIDES

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES VARIO SR POUR RESTAURATIONS OCCLUSALES VISSÉES

N° d'article		Article	Ø en mm	HG en mm	Matériau
Accessoires pour Vario SR					
C4008.1600		Vis de laboratoire CONELOG® Vario SR , à six pans, M 1.6, brun anodisé, pour pilier CONELOG® Vario SR, droit, Ø 3,8/4,3 mm	3,8	—	Alliage de titane
			4,3	—	Alliage de titane
C4008.2000		Vis de laboratoire CONELOG® Vario SR , à six pans, M 2.0, brun anodisé, pour pilier CONELOG® Vario SR, droit, Ø 5,0 mm	5,0	—	Alliage de titane
C4006.1601		Vis de laboratoire CONELOG®, à six pans, M 1.6, brun anodisé, pour pilier CONELOG® Vario SR, angulé 20°/30°, Ø 3,8/4,3 mm	3,8	—	Alliage de titane
			4,3	—	Alliage de titane
C4006.2001		Vis de laboratoire CONELOG®, à six pans, M 2.0, brun anodisé, pour pilier CONELOG® Vario SR, angulé 20°/30°, Ø 5,0 mm	5,0	—	Alliage de titane

HG : hauteur gingivale

Remarque : l'utilisation des vis de laboratoire est autorisée uniquement sur le modèle de travail.

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

RESTAURATIONS HYBRIDES

RESTAURATIONS À COIFFES TÉLESCOPIQUES AVEC PILIERS UNIVERSEL ET TÉLÉSCOPE CONELOG®

N° d'article	Article	Ø en mm	Dimensions en mm	Matériau	Prix (hors taxe)
--------------	---------	------------	---------------------	----------	---------------------

Pilier universel CONELOG® pour la restauration à coiffes télescopiques

C2211.3800	 Pilier universel CONELOG®, personnalisable, avec vis de pilier CONELOG®	3,8	—	Alliage de titane
C2211.4300		4,3	—	Alliage de titane
C2211.5000		5,0	—	Alliage de titane

Pilier télescope CONELOG® pour la restauration à coiffes télescopiques

C2212.3800	 Pilier télescope CONELOG®, personnalisable, avec vis de pilier CONELOG®	3,8	—	Alliage de titane
C2212.4300		4,3	—	Alliage de titane
C2212.5000		5,0	—	Alliage de titane

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

RESTAURATIONS HYBRIDES

ACCESSOIRES POUR PILIERS CAMLOG®

N° d'article	Article	Ø en mm	Dimensions en mm	Matériau
Vis de pilier CONELOG® pour le vissage définitif dans l'implant				
C4005.1601	 Vis de pilier CONELOG®, à six pans 	3,3	Filetage M 1.6	Alliage de titane
		3,8		
		4,3		
C4005.2001		5,0	Filetage M 2.0	Alliage de titane

Vis de laboratoire CONELOG® pour la fixation sur le modèle de travail

C4006.1601	 Vis de laboratoire CONELOG®, à six pans, brun anodisé 	3,3	Filetage M 1.6	Alliage de titane
		3,8		
		4,3		
C4006.2001		5,0	Filetage M 2.0	Alliage de titane

Remarque : l'utilisation des vis de laboratoire est autorisée uniquement sur le modèle de travail.

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

Instruments dentaires

N° d'article	Article	Ø en mm	Matériau
--------------	---------	------------	----------

Manche universel

C3709.0010	 Manche universel, avec 2 vis de laboratoire CONELOG® à six pans, un support pour pilier CONELOG® pour chaque Ø 3,3/3,8/4,3/5,0 mm, pour le meulage des piliers CONELOG®	—	Acier inoxydable/ alliage de titane
------------	---	---	--



J3709.0015	Manche universel	—	Acier inoxydable
------------	-------------------------	---	------------------



Support pour pilier CONELOG®

C3709.3300		Support pour piliers CONELOG®, pour le manche universel 	3,3	Alliage de titane
C3709.3800			3,8	Alliage de titane
C3709.4300			4,3	Alliage de titane
C3709.5000			5,0	Alliage de titane

SYSTÈME PROTHÉTIQUE CONELOG®

PILIERS DE SÉLECTION CONELOG® ESTHOMIC®

N° d'article

Article

Ø
en mm

HG
en mm

Matériau

C8011.1000



Set de piliers de sélection CONELOG® Esthomic®,

Contenu (2 pièces chacun) :

Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, droit	3,8	1,5-2,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, droit	3,8	3,0-4,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, droit	4,3	1,5-2,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, droit	4,3	3,0-4,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, droit	5,0	1,5-2,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, droit	5,0	3,0-4,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 15°, type A	3,8	1,5-2,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 15°, type A	4,3	1,5-2,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 15°, type A	5,0	1,5-2,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 15°, type B	3,8	1,5-2,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 15°, type B	4,3	1,5-2,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 15°, type B	5,0	1,5-2,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 20°, type A	3,8	1,5-2,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 20°, type A	4,3	1,5-2,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 20°, type A	5,0	1,5-2,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 20°, type B	3,8	1,5-2,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 20°, type B	4,3	1,5-2,5	POM
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 20°, type B	5,0	1,5-2,5	POM

HG : hauteur gingivale POM : Polyoxyméthylène

Attention, les piliers de sélection ne doivent pas être utilisés sur les patients !

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES	55
IMPLANTS FACTICES	56
MODÈLES DE DÉMONSTRATION	56
MACRO MODÈLES	56
LITTÉRATURE CAMLOG	57

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

IMPLANTS FACTICES

N° d'article		Article	Ø en mm	Longueur en mm	Matériau
C1069.3813		Implant factice CONELOG® SCREW-LINE, avec porte-implant et vis de fermeture CONELOG®, jaune anodisé	3,8	13	Alliage de titane
C1069.4313-01		Implant factice CONELOG® SCREW-LINE, avec porte-implant et vis de fermeture CONELOG®, rouge anodisé (10 pièces)	4,3	13	Alliage de titane

Attention, les implants factices ne doivent pas être utilisés sur les patients !

MODÈLES DE DÉMONSTRATION

C8070.1020		Modèle de démonstration CONELOG®, plexiglas, Maxillaire, 4 implants CONELOG® SCREW-LINE, 4 x Ø 4,3 mm	Plexiglas/ Titane
C8050.1040		Modèle de démonstration CONELOG®, plexiglas, Mandibule, 4 implants CONELOG® SCREW-LINE, 4 x Ø 4,3 mm	Plexiglas/ Titane
J8070.2050		Mandibule édentée complet avec plaque de montage	Plastique

MACRO MODÈLE

C8010.1010		Macro modèle CONELOG®, Échelle 3:1 Contenu : – 1 implant CONELOG® SCREW-LINE – 1 pilier CONELOG® Esthomic®, droit – 1 vis de pilier CONELOG®, à six pans – 1 tournevis, à six pans – 1 couronne prémolaire pour pilier CONELOG® Esthomic®, droit – 1 socle en plexiglas	Plastique/ Acier inoxydable
------------	---	--	--------------------------------

N° d'article

Article



Brochure patient



Passeport Implants

INFORMATIONS

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS	59
MATÉRIAUX	60
CERTIFICATS	61

INFORMATIONS

MATÉRIAUX

Titane grade 4

Propriétés :

Composition chimique (en %) :	O	0,4 max.
	Fe	0,3 max.
	C	0,1 max.
	N	0,05 max.
	H	0.0125 max.
	Ti	> 99,0
Propriétés mécaniques :	Résistance	680 Mpa min.
	Allongement	10 %

Alliage de titane Ti6Al4V ELI

Propriétés :

Composition chimique (en %) :	Al	5,5–6,75 max.
	V	3,5–4,5 max.
	Fe	0,3 max.
	C	0,08 max.
	N	0,05 max.
	H	0,015 max.
	Ti	~ 90
Propriétés mécaniques :	Résistance	860 Mpa min.
	Allongement	10 %

Alliage d'or coulable Pilier or-plastique CONELOG®

Propriétés :

Composition chimique (en %) :	Au	60
	Pd	20
	Pt	19
	Ir	1
Propriétés physiques :	Intervalle de fusion	1400–1490 °C
	Densité	17,5 g/cm ³
	Module d'élasticité	136 GPa
	Coefficient de dilatation (25–500°C)	11,9 µm/m·°C
	Coefficient de dilatation (25–600°C)	12,2 µm/m·°C
	Couleur	blanc
Propriétés mécaniques :	étiré	
	Dureté HV5	> 215
	Résistance à la tension (Rm)	> 750 MPa
	Limite d'élasticité à 0,2 % (Rp 0,2%)	> 650 MPa
	Allongement à la rupture	> 2 %

Qualité pour l'utilisateur et les patients

La Société ALTATEC GmbH, fabricant des produits CAMLOG, est soumise à tous les niveaux de ses activités aux prescriptions du système d'assurance qualité selon la norme EN ISO 13485:2003.

Cette norme internationale définit les exigences relatives au système de gestion de la qualité que le fabricant utilise pour la conception, le développement ainsi que la production de ses dispositifs médicaux. Cette norme est aussi utilisée par les organismes de certification pour évaluer l'aptitude de la société à répondre aux exigences des organismes régulateurs et à celles des clients.

Nous garantissons ainsi que la qualité de nos produits et services correspond aux attentes de nos clients, de manière toujours compréhensible et traçable. Nos produits satisfont les exigences fondamentales définies dans les lois et directives européennes relatives aux dispositifs médicaux en ce qui concerne les performances des produits et la sécurité des patients. C'est la raison pour laquelle tous nos produits concernés par la législation portent la marque CE.

Les produits de la société ALTATEC GmbH répondent aux exigences strictes de la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE et de la norme EN ISO 13485:2003.



INDEX	63
ALPHABÉTIQUE	64
PAR NUMÉRO D'ARTICLE	69

INDEX

ALPHABÉTIQUE

Article N° d'article Page

A

Adaptateur, norme ISO pour contre-angle/clé à cliquet	J5002.0010	31
Adaptateur pour taraud SCREW-LINE		
court L 18,0 mm	J5322.0010	30
long L 23,0 mm	J5322.0011	30
Aiguille de nettoyage pour foret à irrigation interne	J5002.0012	31
Analogue de laboratoire CONELOG®		
Ø 3,3 mm	C3010.3300	39
Ø 3,8 mm	C3010.3800	39
Ø 4,3 mm	C3010.4300	39
Ø 5,0 mm	C3010.5000	39
Analogue de laboratoire Vario SR		
Ø 3,8/4,3 mm	J2567.4300	45
Ø 5,0 mm	J2567.6000	45
Applicateur ALTApin, angulé à 90°	M5100.0030	28
Applicateur ALTApin, droit, partie travaillante	M5200.0010	28
Applicateur ALTApin, droit	M5100.0010	28

B

Brochure patient		57
Butée de profondeur pour foret calibré SCREW-LINE, avec collet réduit		
Ø 3,3 mm	J5015.3300	20
Ø 3,8 mm	J5015.3800	20
Ø 4,3 mm	J5015.4300	20
Ø 5,0 mm	J5015.5000	20
Butée de profondeur SCREW-LINE pour foret pilote (J5051.2000) et pré-foret (J5051.2800)		
L 7 mm	J5015.0007	19
L 9 mm	J5015.0009	19
L 11 mm	J5015.0011	19
L 13 mm	J5015.0013	19

C

Calque d'implant autocollant échelle 1:1,25 Implants CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus Grilles de planification, autocollantes		
Ø 3,3 mm	C5300.9080	14
Ø 3,8 mm	C5300.9081	14
Ø 4,3 mm	C5300.9082	14
Ø 5,0 mm	C5300.9083	14
Canule de nettoyage pour foret à irrigation interne	J5002.0020	31
Capuchon de protection Vario SR pour pilier		
Ø 3,8/4,3 mm	J2568.4300	48
Ø 5,0 mm	J2568.6000	48

Article N° d'article Page

Capuchon de repositionnement (5 pièces)		
Ø 3,3 mm	J2111.3300	38
Ø 3,8 mm	J2111.3800	38
Ø 4,3 mm	J2111.4300	38
Ø 5,0 mm	J2111.5000	38
Capuchon d'enregistrement de l'occlusion (5 pièces)		
Ø 3,3 mm	J2112.3300	39
Ø 3,8 mm	J2112.3800	39
Ø 4,3 mm	J2112.4300	39
Ø 5,0 mm	J2112.5000	39
Clé à cardans (30°)	J5300.0010	31
Clé dynamométrique	J5320.1030	32
Clé universelle de contre-couple	J5302.0010	31
Coiffe de cicatrisation CONELOG®, bottleneck		
Ø 3,3 mm, HG 4,0 mm	C2011.3340	27
Ø 3,8 mm, HG 4,0 mm	C2011.3840	27
Ø 3,8 mm, HG 6,0 mm	C2011.3860	27
Ø 4,3 mm, HG 4,0 mm	C2011.4340	27
Ø 4,3 mm, HG 6,0 mm	C2011.4360	27
Ø 5,0 mm, HG 4,0 mm	C2011.5040	27
Ø 5,0 mm, HG 6,0 mm	C2011.5060	27
Coiffe de cicatrisation CONELOG®, cylindrique		
Ø 3,3 mm, HG 2,0 mm	C2015.3320	26
Ø 3,3 mm, HG 4,0 mm	C2015.3340	26
Ø 3,8 mm, HG 2,0 mm	C2015.3820	26
Ø 3,8 mm, HG 4,0 mm	C2015.3840	26
Ø 3,8 mm, HG 6,0 mm	C2015.3860	26
Ø 4,3 mm, HG 2,0 mm	C2015.4320	26
Ø 4,3 mm, HG 4,0 mm	C2015.4340	26
Ø 4,3 mm, HG 6,0 mm	C2015.4360	26
Coiffe de cicatrisation CONELOG®, cylindrique		
Ø 5,0 mm, HG 2,0 mm	C2015.5020	26
Ø 5,0 mm, HG 4,0 mm	C2015.5040	26
Ø 5,0 mm, HG 6,0 mm	C2015.5060	26
Coiffe de cicatrisation CONELOG®, évasée		
Ø 3,3 mm, HG 4,0 mm	C2014.3340	26
Ø 3,8 mm, HG 4,0 mm	C2014.3840	26
Ø 3,8 mm, HG 6,0 mm	C2014.3860	26
Ø 4,3 mm, HG 4,0 mm	C2014.4340	26
Ø 4,3 mm, HG 6,0 mm	C2014.4360	26
Ø 5,0 mm, HG 4,0 mm	C2014.5040	26
Ø 5,0 mm, HG 6,0 mm	C2014.5060	26
Coiffe en titane Vario SR bridge, avec vis prothétique Vario SR		
Ø 3,8/4,3 mm	J2564.4301	47
Ø 5,0 mm	J2564.6001	47
Coiffe pour barre Vario SR, pour soudure au laser, avec vis prothétique Vario SR		
Ø 3,8/4,3 mm	J2570.4300	47
Ø 5,0 mm	J2570.6000	47
Coiffe Vario SR pour bridge, calcinable		
Ø 3,8/4,3 mm	J2563.4301	46
Ø 5,0 mm	J2563.6001	46
Coiffe Vario SR pour couronne, à trois surfaces anti-rotationnelles, calcinable		
Ø 3,8/4,3 mm	J2563.4302	46
Ø 5,0 mm	J2563.6002	46

Article N° d'article Page

Coiffe Vario SR pour couronne,		
à une seule surface anti-rotationnelle pour piliers angulés		
Vario SR, calcinable		
Ø 3,8/4,3 mm	J2563.4303	46
Ø 5,0 mm	J2563.6003	46

D

Déconnecteur CONELOG® pour piliers CONELOG®		
Ø 3,3/3,8/4,3 mm, filetage M 1.6	C5300.1601	32
Ø 5,0 mm, filetage M 2.0	C5300.2001	32
Distributeur ALTApin,		
7 clous en titane, double emballage stérile, 1 pièce.....	M1000.0050	28
7 clous en titane, double emballage stérile, 3 pièces	M1000.0100	28

F

Fixateur de membrane ALTApin	M5100.0070	28
Foret calibré SCREW-LINE, avec collet réduit		
Ø 3,3 mm, L 9 mm	J5052.3309	20
Ø 3,3 mm, L 11 mm	J5052.3311	20
Ø 3,3 mm, L 13 mm	J5052.3313	20
Ø 3,3 mm, L 16 mm	J5052.3316	20
Ø 3,8 mm, L 7 mm	J5052.3807	20
Ø 3,8 mm, L 9 mm	J5052.3809	20
Ø 3,8 mm, L 11 mm	J5052.3811	20
Ø 3,8 mm, L 13 mm	J5052.3813	20
Ø 3,8 mm, L 16 mm	J5052.3816	20
Ø 4,3 mm, L 7 mm	J5052.4307	20
Ø 4,3 mm, L 9 mm	J5052.4309	20
Ø 4,3 mm, L 11 mm	J5052.4311	20
Ø 4,3 mm, L 13 mm	J5052.4313	20
Ø 4,3 mm, L 16 mm	J5052.4316	20
Ø 5,0 mm, L 7 mm	J5052.5007	20
Ø 5,0 mm, L 9 mm	J5052.5009	20
Ø 5,0 mm, L 11 mm	J5052.5011	20
Ø 5,0 mm, L 13 mm	J5052.5013	20
Ø 5,0 mm, L 16 mm	J5052.5016	20
Foret calibré SCREW-LINE, os cortical		
Ø 3,3 mm	J5053.3316	21
Ø 3,8 mm	J5053.3816	21
Ø 4,3 mm	J5053.4316	21
Ø 5,0 mm	J5053.5016	21
Foret pilote, sans collet		
Ø 2,0 mm	J5005.2003	19
Foret pilote SCREW-LINE,		
collet réduit		
Ø 2,0 mm	J5051.2000	19
Foret pour mise en place des tubes de guidage cannelés		
(pour A2002.2000), Ø 2,6 mm	A2050.2600	15
(pour A2222.2200), Ø 2,8 mm	A2050.2800	15
Foret à usage unique ALTApin, norme ISO	M5500.0050	28
Fraise boule		
Ø 2,3 mm	J5050.2300	19
Ø 3,5 mm	J5050.3500	19

Article N° d'article Page

G

Gainede maintien pour implants		
Ø 3,3 mm	J5302.3300	31
Ø 3,8 mm	J5302.3800	31
Ø 4,3 mm	J5302.4300	31
Grille de planification radiologique, échelle, 1:1,4		
Implants CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus	C5300.9011	14
Grille de planification radiologique, échelle 1:1,25		
Implants CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus	C5300.9010	14

I

Implant factice CONELOG® SCREW-LINE		
Ø 3,8 mm	C1069.3813	56
Ø 4,3 mm	C1069.4313-01	56
Implant CONELOG® SCREW-LINE, Promote® plus		
Ø 3,3 mm, L 9 mm	C1062.3309	17
Ø 3,3 mm, L 11 mm	C1062.3311	17
Ø 3,3 mm, L 13 mm	C1062.3313	17
Ø 3,3 mm, L 16 mm	C1062.3316	17
Ø 3,8 mm, L 7 mm	C1062.3807	17
Ø 3,8 mm, L 9 mm	C1062.3809	17
Ø 3,8 mm, L 11 mm	C1062.3811	17
Ø 3,8 mm, L 13 mm	C1062.3813	17
Ø 3,8 mm, L 16 mm	C1062.3816	17
Ø 4,3 mm, L 7 mm	C1062.4307	17
Ø 4,3 mm, L 9 mm	C1062.4309	17
Ø 4,3 mm, L 11 mm	C1062.4311	17
Ø 4,3 mm, L 13 mm	C1062.4313	17
Ø 4,3 mm, L 16 mm	C1062.4316	17
Ø 5,0 mm, L 7 mm	C1062.5007	17
Ø 5,0 mm, L 9 mm	C1062.5009	17
Ø 5,0 mm, L 11 mm	C1062.5011	17
Ø 5,0 mm, L 13 mm	C1062.5013	17
Ø 5,0 mm, L 16 mm	C1062.5016	17
Instrument de pose d'implant, court, pour implants vissés,		
manuel/clé dynamométrique, L 18,0 mm	J5300.0008	30
Instrument de pose, long, pour implants vissés,		
manuel/clé dynamométrique, L 27,0 mm	J5300.0009	30
Instrument de pose pour implants vissés,		
avec norme ISO pour contre-angle	J5300.0007	30
Instrument d'insertion, long pour implants		
CONELOG® SCREW-LINE		
Ø 3,3 mm	C5302.3310	31
Ø 3,8 mm	C5302.3810	31
Ø 4,3 mm	C5302.3810	31
Instrument pick-up	J5300.0030	31

INDEX

ALPHABÉTIQUE

Article N° d'article Page

J

Jauge d'angulation 20° Vario SR, pour porte-implant		
Ø 3,8/4,3/5,0 mm	J2569.0001	48
Jauge d'angulation 30° Vario SR, pour porte-implant		
Ø 3,8/4,3/5,0 mm	J2569.0002	48

M

Macro modèle CONELOG®		
Échelle 3:1	C8010.1010	56
Maillet chirurgical ALTApin	M5100.0100	28
Manche universel, avec 2 vis de laboratoire CONELOG®, à six pans et un manchon de polissage CONELOG® pour chacune		
Ø 3,3/3,8/4,3/5,0 mm	C3709.0010	52
Mandibule complètement édentée avec plaquette de montage	J8070.2050	56
Modèle de démonstration CONELOG®, plexiglas, maxillaire, CONELOG® SCREW-LINE		
Ø 4,3 mm	C8070.1020	56
Modèle de démonstration CONELOG®, plexiglas, mandibule, CONELOG® SCREW-LINE		
Ø 4,3 mm	C8050.1040	56

O

Ostéotome SCREW-LINE, angulé-concave		
Ø 3,3 mm	J5420.3310	25
Ø 3,8 mm	J5420.3810	25
Ø 4,3 mm	J5420.4310	25
Ø 5,0 mm	J5420.5010	25
Ostéotome SCREW-LINE, angulé-convexe		
Ø 3,3 mm	J5418.3310	23
Ø 3,8 mm	J5418.3810	23
Ø 4,3 mm	J5418.4310	23
Ø 5,0 mm	J5418.5010	23
Ostéotome SCREW-LINE, droit-concave		
Ø 3,3 mm	J5420.3300	24
Ø 3,8 mm	J5420.3800	24
Ø 4,3 mm	J5420.4300	24
Ø 5,0 mm	J5420.5000	24
Ostéotome SCREW-LINE, droit-convexe		
Ø 3,3 mm	J5418.3300	22
Ø 3,8 mm	J5418.3800	22
Ø 4,3 mm	J5418.4300	22
Ø 5,0 mm	J5418.5000	22

Article N° d'article Page

P

Passeport implants		57
Pilier de parallélisme SCREW-LINE		
Ø 1,7–2,8/2,0 mm	J5300.2028	30
Pilier de prise d'empreinte CONELOG®, porte-empreinte fermé		
Ø 3,3 mm	C2110.3300	38
Ø 3,8 mm	C2110.3800	38
Ø 4,3 mm	C2110.4300	38
Ø 5,0 mm	C2110.5000	38
Pilier de prise d'empreinte CONELOG®, porte-empreinte ouvert		
Ø 3,3 mm	C2121.3300	38
Ø 3,8 mm	C2121.3800	38
Ø 4,3 mm	C2121.4300	38
Ø 5,0 mm	C2121.5000	38
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 15°, type B		
Ø 3,8 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2228.3815	40
Ø 3,8 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2228.3830	40
Ø 4,3 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2228.4315	40
Ø 4,3 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2228.4330	40
Ø 5,0 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2228.5015	40
Ø 5,0 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2228.5030	40
Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 20°, type B		
Ø 3,8 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2232.3815	41
Ø 3,8 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2232.3830	41
Ø 4,3 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2232.4315	41
Ø 4,3 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2232.4330	41
Ø 5,0 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2232.5015	41
Ø 5,0 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2232.5030	41
Pilier or-plastique CONELOG® pour surcoulée, avec vis de pilier CONELOG®		
Ø 3,3 mm	C2246.3300	42
Ø 3,8 mm	C2246.3800	42
Ø 4,3 mm	C2246.4300	42
Ø 5,0 mm	C2246.5000	42
Pilier provisoire CONELOG®		
Ø 3,8 mm	C2239.3800	39
Ø 4,3 mm	C2239.4300	39
Ø 5,0 mm	C2239.5000	39
Pilier télescope CONELOG®, personnalisable, avec vis de pilier CONELOG®		
Ø 3,8 mm	C2212.3800	50
Ø 4,3 mm	C2212.4300	50
Ø 5,0 mm	C2212.5000	50
Pilier universel CONELOG®, personnalisable, avec vis de pilier CONELOG®		
Ø 3,3 mm	C2211.3300	42
Ø 3,8 mm	C2211.3800	42, 50
Ø 4,3 mm	C2211.4300	42, 50
Ø 5,0 mm	C2211.5000	42, 50
Pilier CONELOG® Esthomic®, angulé à 15°, type A		
Ø 3,8 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2227.3815	40
Ø 3,8 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2227.3830	40
Ø 4,3 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2227.4315	40
Ø 4,3 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2227.4330	40
Pilier CONELOG® Esthomic®, angulé à 15°, type A		
Ø 5,0 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2227.5015	40
Ø 5,0 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2227.5030	40

Article N° d'article Page

Pilier CONELOG® Esthomic®, angulé à 20°, type A		
Ø 3,8 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2231.3815	41
Ø 3,8 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2231.3830	41
Ø 4,3 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2231.4315	41
Ø 4,3 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2231.4330	41
Ø 5,0 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2231.5015	41
Ø 5,0 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2231.5030	41
Pilier CONELOG® Esthomic®, droit		
Ø 3,8 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2226.3815	40
Ø 3,8 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2226.3830	40
Ø 4,3 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2226.4315	40
Ø 4,3 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2226.4330	40
Ø 5,0 mm, HG 1,5–2,5 mm	C2226.5015	40
Ø 5,0 mm, HG 3,0–4,5 mm	C2226.5030	40
Pilier CONELOG® Esthomic®, Inset		
Ø 3,3 mm	C2235.3320	41
Ø 3,8 mm	C2235.3820	41
Ø 4,3 mm	C2235.4320	41
Ø 5,0 mm	C2235.5020	41
Pilier CONELOG® Vario SR, angulé 20°		
avec vis de pilier CONELOG®		
Ø 3,8 mm	C2561.3800	44
Ø 4,3 mm	C2561.4300	44
Ø 5,0 mm	C2561.5000	44
Pilier CONELOG® Vario SR, angulé 30°		
avec vis de pilier CONELOG®		
Ø 3,8 mm	C2562.3800	44
Ø 4,3 mm	C2562.4300	44
Ø 5,0 mm	C2562.5000	44
Pilier CONELOG® Vario SR, droit,		
avec vis de pilier CONELOG® Vario SR		
Ø 3,8 mm	C2560.3808	44
Ø 4,3 mm	C2560.4308	44
Ø 5,0 mm	C2560.5008	44
Pointeau ALTApin	M5100.0050	28
Pointe de rechange pour le pointeau ALTApin	M5200.0055	28
Prolongateur de foret, norme ISO		
L 26,6 mm	J5002.0005	30
Pré-foret SCREW-LINE		
Ø 1,7–2,8 mm	J5051.2800	19
Pré-ostéotome SCREW-LINE, droit-concave		
Ø 1,7–2,8 mm	J5419.2800	24, 25
Pré-ostéotome SCREW-LINE, droit-convexe		
Ø 1,7–2,8 mm	J5417.2800	22, 23

S

Set ALTApin	M5600.0110	28
Set chirurgical CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE..	J5300.0057	18
Set de piliers de sélection CONELOG® Esthomic®..	C8011.1000	53
Set d'ostéotomie CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE		
angulé-concave	J5420.0030	25
angulé-convexe	J5418.0030	23
droit-concave	J5420.0020	24
droit-convexe	J5418.0020	22
Set d'élévation sinusienne	T2010.0010	29

Article N° d'article Page

Support pour piliers CONELOG® pour le manche universel		
Ø 3,3 mm	C3709.3300	52
Ø 3,8 mm	C3709.3800	52
Ø 4,3 mm	C3709.4300	52
Ø 5,0 mm	C3709.5000	52
Support universel pour piliers	J3709.0015	52

T

Taraud SCREW-LINE, à 6 pans		
Ø 3,3 mm	J5054.3309	21
Ø 3,8 mm	J5054.3809	21
Ø 4,3 mm	J5054.4309	21
Ø 5,0 mm	J5054.5009	21
Tournevis à six pans, court,		
manuel/clé à dynamométrique	J5316.0501	32
Tournevis à six pans, court, norme ISO	J5316.0504	32
Tournevis à six pans, extracourt,		
manuel/clé dynamométrique	J5316.0510	32
Tournevis à six pans, long,		
manuel/clé à dynamométrique	J5316.0502	32
Tournevis à six pans, long, norme ISO	J5316.0503	32
Transfert d'empreinte Vario SR, porte-empreinte fermé		
Ø 3,8/4,3 mm	J2565.4300	45
Ø 5,0 mm	J2565.6000	45
Transfert d'empreinte Vario SR, porte-empreinte ouvert,		
avec vis de fixation		
Ø 3,8/4,3 mm	J2566.4300	45
Ø 5,0 mm	J2566.6000	45
Trousse chirurgicale ALTApin	M5600.0210	28
Trousse prothétique	J5330.8600	32
Trousse prothétique (vide)	J5330.8500	32
Tube de guidage pour foret Ø 2,0 mm		
diamètre intérieur 2,1 mm	A2002.2000	15
Tube de guidage pour foret Ø 2,2 mm		
diamètre intérieur 2,3 mm	A2222.2200	15

V

Vis de laboratoire CONELOG®, à six pans,		
brun anodisé		
filetage M 1.6	C4006.1601	43, 49, 51
filetage M 2.0	C4006.2001	43, 49, 51
Vis de laboratoire CONELOG® Vario SR,		
à six pans, droit		
Ø 3,8/4,3 mm, filetage M 1.6	C4008.1600	49
Ø 5,0 mm, filetage M 2.0	C4008.2000	49
Vis de pilier CONELOG®, à six pans		
filetage M 1.6	C4005.1601	43, 48, 51
filetage M 2.0	C4005.2001	43, 48, 51
Vis de pilier CONELOG® Vario SR,		
à six pans, droit		
Ø 3,8/4,3 mm, filetage M 1.6	C4007.1600	48
Ø 5,0 mm, filetage M 2.0	C4007.2000	48
Vis prothétique Vario SR, à six pans		
Ø 3,8/4,3/5,0 mm, filetage M 2.0	J4005.2004	48

INDEX

N° D'ARTICLE

N° d'article	Article	Page
	Tube de guidage pour foret Ø 2,0 mm	
A2002.2000	Diamètre intérieur 2,1 mm.....	15
	Foret pour mise en place des tubes de guidage cannelés	
A2050.2600	(pour A2002.2000), Ø 2,6 mm.....	15
A2050.2800	(pour A2222.2200), Ø 2,8 mm.....	15
	Tube de guidage pour foret Ø 2,2 mm	
A2222.2200	Diamètre intérieur 2,3 mm.....	15
	Implant CONELOG® SCREW-LINE, Promote® plus	
C1062.3309	Ø 3,3 mm, L 9 mm.....	17
C1062.3311	Ø 3,3 mm, L 11 mm.....	17
C1062.3313	Ø 3,3 mm, L 13 mm.....	17
C1062.3316	Ø 3,3 mm, L 16 mm.....	17
C1062.3807	Ø 3,8 mm, L 7 mm.....	17
C1062.3809	Ø 3,8 mm, L 9 mm.....	17
C1062.3811	Ø 3,8 mm, L 11 mm.....	17
C1062.3813	Ø 3,8 mm, L 13 mm.....	17
C1062.3816	Ø 3,8 mm, L 16 mm.....	17
C1062.4307	Ø 4,3 mm, L 7 mm.....	17
C1062.4309	Ø 4,3 mm, L 9 mm.....	17
C1062.4311	Ø 4,3 mm, L 11 mm.....	17
C1062.4313	Ø 4,3 mm, L 13 mm.....	17
C1062.4316	Ø 4,3 mm, L 16 mm.....	17
C1062.5007	Ø 5,0 mm, L 7 mm.....	17
C1062.5009	Ø 5,0 mm, L 9 mm.....	17
C1062.5011	Ø 5,0 mm, L 11 mm.....	17
C1062.5013	Ø 5,0 mm, L 13 mm.....	17
C1062.5016	Ø 5,0 mm, L 16 mm.....	17
	Implant factice CONELOG® SCREW-LINE	
C1069.3813	Ø 3,8 mm.....	56
C1069.4313-01	Ø 4,3 mm.....	56
	Coiffe de cicatrisation CONELOG®, bottleneck	
C2011.3340	Ø 3,3 mm, HG 4,0 mm.....	27
C2011.3840	Ø 3,8 mm, HG 4,0 mm.....	27
C2011.3860	Ø 3,8 mm, HG 6,0 mm.....	27
C2011.4340	Ø 4,3 mm, HG 4,0 mm.....	27
C2011.4360	Ø 4,3 mm, HG 6,0 mm.....	27
C2011.5040	Ø 5,0 mm, HG 4,0 mm.....	27
C2011.5060	Ø 5,0 mm, HG 6,0 mm.....	27
	Coiffe de cicatrisation CONELOG®, évasée	
C2014.3340	Ø 3,3 mm, HG 4,0 mm.....	26
C2014.3840	Ø 3,8 mm, HG 4,0 mm.....	26
C2014.3860	Ø 3,8 mm, HG 6,0 mm.....	26
C2014.4340	Ø 4,3 mm, HG 4,0 mm.....	26
C2014.4360	Ø 4,3 mm, HG 6,0 mm.....	26
C2014.5040	Ø 5,0 mm, HG 4,0 mm.....	26
C2014.5060	Ø 5,0 mm, HG 6,0 mm.....	26
	Coiffe de cicatrisation CONELOG®, cylindrique	
C2015.3320	Ø 3,3 mm, HG 2,0 mm.....	26
C2015.3340	Ø 3,3 mm, HG 4,0 mm.....	26
C2015.3820	Ø 3,8 mm, HG 2,0 mm.....	26
C2015.3840	Ø 3,8 mm, HG 4,0 mm.....	26
C2015.3860	Ø 3,8 mm, HG 6,0 mm.....	26
C2015.4320	Ø 4,3 mm, HG 2,0 mm.....	26
C2015.4340	Ø 4,3 mm, HG 4,0 mm.....	26
C2015.4360	Ø 4,3 mm, HG 6,0 mm.....	26
C2015.5020	Ø 5,0 mm, HG 2,0 mm.....	26
C2015.5040	Ø 5,0 mm, HG 4,0 mm.....	26
C2015.5060	Ø 5,0 mm, HG 6,0 mm.....	26
	Pilier de prise d'empreinte CONELOG®, porte-empreinte fermé	
C2110.3300	Ø 3,3 mm.....	38
C2110.3800	Ø 3,8 mm.....	38
C2110.4300	Ø 4,3 mm.....	38
C2110.5000	Ø 5,0 mm.....	38

N° d'article	Article	Page
	Pilier de prise d'empreinte CONELOG®, porte-empreinte ouvert	
C2121.3300	Ø 3,3 mm.....	38
C2121.3800	Ø 3,8 mm.....	38
C2121.4300	Ø 4,3 mm.....	38
C2121.5000	Ø 5,0 mm.....	38
	Pilier universel CONELOG®, personnalisable, avec vis de pilier CONELOG®	
C2211.3300	Ø 3,3 mm.....	42
C2211.3800	Ø 3,8 mm.....	42, 50
C2211.4300	Ø 4,3 mm.....	42, 50
C2211.5000	Ø 5,0 mm.....	42, 50
	Pilier télescope CONELOG®, personnalisable, avec vis de pilier CONELOG®	
C2212.3800	Ø 3,8 mm.....	50
C2212.4300	Ø 4,3 mm.....	50
C2212.5000	Ø 5,0 mm.....	50
	Pilier CONELOG® Esthomic®, droit	
C2226.3815	Ø 3,8 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	40
C2226.3830	Ø 3,8 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	40
C2226.4315	Ø 4,3 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	40
C2226.4330	Ø 4,3 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	40
C2226.5015	Ø 5,0 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	40
C2226.5030	Ø 5,0 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	40
	Pilier CONELOG® Esthomic®, angulé à 15°, type A	
C2227.3815	Ø 3,8 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	40
C2227.3830	Ø 3,8 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	40
C2227.4315	Ø 4,3 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	40
C2227.4330	Ø 4,3 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	40
C2227.5015	Ø 5,0 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	40
C2227.5030	Ø 5,0 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	40
	Pilier de sélection CONELOG® Esthomic®, angulé à 15°, type B	
C2228.3815	Ø 3,8 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	40
C2228.3830	Ø 3,8 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	40
C2228.4315	Ø 4,3 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	40
C2228.4330	Ø 4,3 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	40
C2228.5015	Ø 5,0 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	40
C2228.5030	Ø 5,0 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	40
	Pilier CONELOG® Esthomic®, angulé à 20°, type A	
C2231.3815	Ø 3,8 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	41
C2231.3830	Ø 3,8 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	41
C2231.4315	Ø 4,3 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	41
C2231.4330	Ø 4,3 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	41
C2231.5015	Ø 5,0 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	41
C2231.5030	Ø 5,0 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	41
	Pilier CONELOG® Esthomic®, angulé à 20°, type B	
C2232.3815	Ø 3,8 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	41
C2232.3830	Ø 3,8 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	41
C2232.4315	Ø 4,3 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	41
C2232.4330	Ø 4,3 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	41
C2232.5015	Ø 5,0 mm, HG 1,5-2,5 mm.....	41
C2232.5030	Ø 5,0 mm, HG 3,0-4,5 mm.....	41
	Pilier CONELOG® Esthomic®, Inset	
C2235.3320	Ø 3,3 mm.....	41
C2235.3820	Ø 3,8 mm.....	41
C2235.4320	Ø 4,3 mm.....	41
C2235.5020	Ø 5,0 mm.....	41

INDEX

N° D'ARTICLE

N° d'article	Article	Page
	Pilier provisoire CONELOG®	
C2239.3800	Ø 3,8 mm	39
C2239.4300	Ø 4,3 mm	39
C2239.5000	Ø 5,0 mm	39
	Pilier or-plastique CONELOG®	
C2246.3300	Ø 3,3 mm	42
C2246.3800	Ø 3,8 mm	42
C2246.4300	Ø 4,3 mm	42
C2246.5000	Ø 5,0 mm	42
	Pilier CONELOG® Vario SR, droit, avec vis de pilier CONELOG® Vario SR	
C2560.3808	Ø 3,8 mm	44
C2560.4308	Ø 4,3 mm	44
C2560.5008	Ø 5,0 mm	44
	Pilier CONELOG® Vario SR, angulé 20°, avec vis de pilier CONELOG®	
C2561.3800	Ø 3,8 mm	44
C2561.4300	Ø 4,3 mm	44
C2561.5000	Ø 5,0 mm	44
	Pilier CONELOG® Vario SR, angulé 30°, avec vis de pilier CONELOG®	
C2562.3800	Ø 3,8 mm	44
C2562.4300	Ø 4,3 mm	44
C2562.5000	Ø 5,0 mm	44
	Analogue de laboratoire CONELOG®	
C3010.3300	Ø 3,3 mm	39
C3010.3800	Ø 3,8 mm	39
C3010.4300	Ø 4,3 mm	39
C3010.5000	Ø 5,0 mm	39
	Manche universel, avec 2 vis de laboratoire CONELOG®, à six pans et un manchon de polissage CONELOG® pour chacune	
C3709.0010	Ø 3,3/3,8/4,3/5,0 mm	52
	Support pour piliers CONELOG®, pour manche universel	
C3709.3300	Ø 3,3 mm	52
C3709.3800	Ø 3,8 mm	52
C3709.4300	Ø 4,3 mm	52
C3709.5000	Ø 5,0 mm	52
	Vis de pilier CONELOG®, à six pans	
C4005.1601	filetage M 1.6	43, 48, 51
C4005.2001	filetage M 2.0	43, 48, 51
	Vis de laboratoire CONELOG®, à six pans, brun anodisé	
C4006.1601	filetage M 1.6	43, 49, 51
C4006.2001	filetage M 2.0	43, 49, 51
	Vis de pilier CONELOG® Vario SR, à six pans	
C4007.1600	filetage M 1.6	48
C4007.2000	filetage M 2.0	48
	Vis de laboratoire CONELOG®, à six pans, brun anodisé	
C4008.1600	filetage M 1.6	49
C4008.2000	filetage M 2.0	49
	Déconnecteur CONELOG® pour piliers CONELOG®	
C5300.1601	Ø 3,3/3,8/4,3 mm, filetage M 1.6	32
C5300.2001	Ø 5,0 mm, filetage M 2.0	32
	Grille de planification radiologique, échelle 1:1,25	
C5300.9010	Implants CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus	14
	Grille de planification radiologique, échelle, 1:1,4	

N° d'article	Article	Page
C5300.9011	Implants CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus	14
	Calque d'implant autocollant échelle 1:1,25	
	Implants CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus Grilles de planification radiologiques autocollante	
C5300.9080	Ø 3,3 mm	14
C5300.9081	Ø 3,8 mm	14
C5300.9082	Ø 4,3 mm	14
C5300.9083	Ø 5,0 mm	14
	Instrument d'insertion, long pour implants CONELOG® SCREW-LINE	
C5302.3310	Ø 3,3 mm	31
C5302.3810	Ø 3,8 mm	31
C5302.3810	Ø 4,3 mm	31
	Macro modèle CONELOG®	
C8010.1010	Échelle 3:1	56
C8011.1000	Set de piliers de sélection CONELOG® Esthomic® 53	
	Modèle de démonstration CONELOG®, plexiglas, mandibule, CONELOG® SCREW-LINE	
C8050.1040	Ø 4,3 mm	56
	Modèle de démonstration CONELOG®, plexiglas, maxillaire, CONELOG® SCREW-LINE	
C8070.1020	Ø 4,3 mm	56
	Capuchon de repositionnement (5 pièces)	
J2111.3300	Ø 3,3 mm	38
J2111.3800	Ø 3,8 mm	38
J2111.4300	Ø 4,3 mm	38
J2111.5000	Ø 5,0 mm	38
	Capuchon d'enregistrement de l'occlusion (5 pièces)	
J2112.3300	Ø 3,3 mm	39
J2112.3800	Ø 3,8 mm	39
J2112.4300	Ø 4,3 mm	39
J2112.5000	Ø 5,0 mm	39
	Coiffe Vario SR pour bridge, calcinable	
J2563.4301	Ø 3,8/4,3 mm	46
	Coiffe Vario SR pour couronne, à trois surfaces anti-rotationnelles, calcinable,	
J2563.4302	Ø 3,8/4,3 mm	46
	Coiffe Vario SR pour couronne, à une seule surface anti-rotationnelle pour piliers angulés Vario SR, calcinable	
J2563.4303	Ø 3,8/4,3 mm	46
	Coiffe Vario SR pour bridge, calcinable	
J2563.6001	Ø 5,0 mm	46
	Coiffe Vario SR pour couronne, à trois surfaces anti-rotationnelles, calcinable	
J2563.6002	Ø 5,0 mm	46
	Coiffe Vario SR pour couronne, à une seule surface anti-rotationnelle pour piliers angulés Vario SR, calcinable	
J2563.6003	Ø 5,0 mm	46
	Coiffe en titane Vario SR bridge, avec vis prothétique Vario SR	
J2564.4301	Ø 3,8/4,3 mm	47
J2564.6001	Ø 5,0 mm	47
	Transfert d'empreinte Vario SR, porte-empreinte fermé	
J2565.4300	Ø 3,8/4,3 mm	45

INDEX

N° D'ARTICLE

N° d'article	Article	Page
J2565.6000	Ø 5,0 mm Transfert d'empreinte Vario SR, porte-empreinte ouvert, avec vis de fixation	45
J2566.4300	Ø 3,8/4,3 mm	45
J2566.6000	Ø 5,0 mm Analogue de laboratoire Vario SR	45
J2567.4300	Ø 3,8/4,3 mm	45
J2567.6000	Ø 5,0 mm Capuchon de protection Vario SR pour pilier	45
J2568.4300	Ø 3,8/4,3 mm	48
J2568.6000	Ø 5,0 mm Jauge d'angulation 20° Vario SR, pour porte-implant	48
J2569.0001	Ø 3,8/4,3/5,0 mm Jauge d'angulation 30° Vario SR, pour porte-implant	48
J2569.0002	Ø 3,8/4,3/5,0 mm Coiffe pour barre Vario SR, pour soudure au laser, avec vis prothétique Vario SR	48
J2570.4300	Ø 3,8/4,3 mm	47
J2570.6000	Ø 5,0 mm	47
J3709.0015	Support universel	52
J4005.2004	Vis prothétique Vario SR, à six pans Ø 3,8/4,3/5,0 mm, filetage M 2.0.....	48
J5002.0005	Prolongateur de foret, norme ISO L 26,6 mm	30
J5002.0010	Adaptateur, norme ISO pour contre-angle/clé dynamométrique	31
J5002.0012	Aiguille de nettoyage pour foret à irrigation interne	31
J5002.0020	Canule de nettoyage pour foret à irrigation interne	31
J5005.2003	Foret pilote sans collet Ø 2,0 mm	19
J5015.0007	Butée de profondeur SCREW-LINE pour foret pilote (J5051.2000) et pré-foret (J5051.2800) L 7 mm	19
J5015.0009	L 9 mm	19
J5015.0011	L 11 mm	19
J5015.0013	L 13 mm	19
J5015.3300	Butée de profondeur pour foret calibré SCREW-LINE, avec collet réduit Ø 3,3 mm	20
J5015.3800	Ø 3,8 mm	20
J5015.4300	Ø 4,3 mm	20
J5015.5000	Ø 5,0 mm	20
J5050.2300	Fraise boule Ø 2,3 mm	19
J5050.3500	Ø 3,5 mm	19
J5051.2000	Foret pilote SCREW-LINE, collet réduit Ø 2,0 mm	19
J5051.2800	Pré-foret SCREW-LINE Ø 1,7–2,8 mm	19

N° d'article	Article	Page
J5052.3309	Foret calibré SCREW-LINE, avec collet réduit Ø 3,3 mm, L 9 mm	20
J5052.3311	Ø 3,3 mm, L 11 mm	20
J5052.3313	Ø 3,3 mm, L 13 mm	20
J5052.3316	Ø 3,3 mm, L 16 mm	20
J5052.3807	Ø 3,8 mm, L 7 mm	20
J5052.3809	Ø 3,8 mm, L 9 mm	20
J5052.3811	Ø 3,8 mm, L 11 mm	20
J5052.3813	Ø 3,8 mm, L 13 mm	20
J5052.3816	Ø 3,8 mm, L 16 mm	20
J5052.4307	Ø 4,3 mm, L 7 mm	20
J5052.4309	Ø 4,3 mm, L 9 mm	20
J5052.4311	Ø 4,3 mm, L 11 mm	20
J5052.4313	Ø 4,3 mm, L 13 mm	20
J5052.4316	Ø 4,3 mm, L 16 mm	20
J5052.5007	Ø 5,0 mm, L 7 mm	20
J5052.5009	Ø 5,0 mm, L 9 mm	20
J5052.5011	Ø 5,0 mm, L 11 mm	20
J5052.5013	Ø 5,0 mm, L 13 mm	20
J5052.5016	Ø 5,0 mm, L 16 mm	20
J5053.3316	Foret calibré SCREW-LINE, os cortical Ø 3,3 mm	21
J5053.3816	Ø 3,8 mm	21
J5053.4316	Ø 4,3 mm	21
J5053.5016	Ø 5,0 mm	21
J5054.3309	Taraud SCREW-LINE, à 6 pans Ø 3,3 mm	21
J5054.3809	Ø 3,8 mm	21
J5054.4309	Ø 4,3 mm	21
J5054.5009	Ø 5,0 mm	21
J5300.0007	Instrument de pose pour implants vissés, avec norme ISO pour contre-angle L 27,5 mm.....	30
J5300.0008	Instrument de pose, court pour implants vissés, manuel/clé dynamométrique, L 18,0 mm.....	30
J5300.0009	Instrument de pose, long pour implants vissés, manuel/clé dynamométrique, L 27,0 mm.....	30
J5300.0010	Clé à cardans (30°)	31
J5300.0030	Instrument pick-up	31
J5300.0057	Set chirurgical CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE 18	
J5300.2028	Pilier de parallélisme SCREW-LINE Ø 1,7–2,8/2,0 mm	30
J5302.0010	Clé universelle de contre-couple	31
J5302.3300	Gaine de maintien pour implants Ø 3,3 mm	31
J5302.3800	Ø 3,8 mm	31
J5302.4300	Ø 4,3 mm	31
J5316.0501	Tournevis à six pans, court, manuel/clé dynamométrique	32
J5316.0502	Tournevis à six pans, long, manuel/clé à cliquet	32
J5316.0503	Tournevis à six pans, long, norme ISO	32
J5316.0504	Tournevis à six pans, court, norme ISO	32
J5316.0510	Tournevis à six pans, extracourt, manuel/clé dynamométrique.....	32
J5320.1030	Clé dynamométrique	32
J5322.0010	Adaptateur pour tarauds SCREW-LINE L 18,0 mm, court.....	30

INDEX

N° D'ARTICLE

N° d'article	Article	Page
J5322.0011	L 23,0 mm, long.....	30
J5330.8500	Trousse prothétique (vide)	32
J5330.8600	Trousse prothétique.....	32
	Pré-ostéotome SCREW-LINE, droit-convexe	
J5417.2800	Ø 1,7–2,8 mm	22, 23
	Set d'ostéotomie	
	CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE	
J5418.0020	droit-convexe	22
J5420.0020	droit-concave	24
J5418.0030	angulé-convexe	23
J5420.0030	angulé-concave	25
	Ostéotome SCREW-LINE, droit-convexe	
J5418.3300	Ø 3,3 mm	22
J5418.3800	Ø 3,8 mm	22
J5418.4300	Ø 4,3 mm	22
J5418.5000	Ø 5,0 mm	22
	Ostéotome SCREW-LINE, angulé-convexe	
J5418.3310	Ø 3,3 mm	23
J5418.3810	Ø 3,8 mm	23
J5418.4310	Ø 4,3 mm	23
J5418.5010	Ø 5,0 mm	23
	Pré-ostéotome SCREW-LINE, droit-concave	
J5419.2800	Ø 1,7–2,8 mm	24, 25
	Ostéotome SCREW-LINE, droit-concave	
J5420.3300	Ø 3,3 mm	24
J5420.3800	Ø 3,8 mm	24
J5420.4300	Ø 4,3 mm	24
J5420.5000	Ø 5,0 mm	24
	Ostéotome SCREW-LINE, angulé-concave	
J5420.3310	Ø 3,3 mm	25
J5420.3810	Ø 3,8 mm	25
J5420.4310	Ø 4,3 mm	25
J5420.5010	Ø 5,0 mm	25
J8070.2050	Mandibule complètement édentée avec plaquette de montage	56
	Distributeur ALTApin	
M1000.0050	7 clous en titane, double stérilisation, 1 pièce.....	28
M1000.0100	7 clous en titane, double stérilisation, 3 pièce.....	28
M5100.0010	Applicateur ALTApin, droit	28
M5100.0030	Applicateur ALTApin, angulé 90°	28
M5100.0050	Pointeau ALTApin	28
M5100.0070	Fixateur de membrane ALTApin	28
M5100.0100	Maillet chirurgical ALTApin	28
M5200.0010	Applicateur ALTApin, droit, partie travaillante..	28
M5200.0055	Pointe de rechange pour le pointeau ALTApin ..	28
M5500.0050	Foret à usage unique ALTApin, norme ISO	28
M5600.0110	Set ALTApin	28
M5600.0210	Trousse chirurgicale ALTApin.....	28
T2010.0010	Set d'élévation sinusienne.....	29

Expéditeur/Cachet

Date/Signature

Votre numéro de client

Bon de commande

Livraison
☐ normal ☐ express

Quantité	N° d'article	Désignation	Prix unitaire €

Nous vous remercions pour votre commande.

